

Інструкція із заміни для:

RP0200-130-05, QuickFit® комплект заміни диска та шнурка — чорний
 RP0200-130-W, QuickFit® комплект заміни диска та шнурка — білий



Допомога та відеоінструкції: clickmedical.co/quickfit-lacer

Комплект для заміни — вміст:



1× змінна деталь
 Сталевий шнурок, 1,5 м



1× змінна котушка
 BOA®

Сумісно з:

QFL-130-B-2, QuickFit® Lacer — чорний, набір із 2 шт.
 QFL-130-W-2, QuickFit® Lacer — білий, набір із 2 шт.



Попередження

Встановлення має виконувати лише навчений фахівець.
 Шнур з часом зношується — перевіряйте щонайменше раз на місяць. Надмірне затягування може погіршити кровообіг.
 Не використовуйте для пацієнтів із порушеннями нервової системи. Тримайте шнур подалі від гострих країв.

Попередження іншими мовами: clickmedical.co/advisories



ГАРАНТІЯ:

www.clickmedical.co/terms/#warranty

Клієнти у США: Звертайтеся безпосередньо до Click Medical:
Help@ClickMedical.co Гаряча лінія: +1 970 670 7012 **Міжнародні клієнти:**

Будь ласка, зверніться до вашого місцевого дистриб'ютора

UK REP

Parkway House, Palatine Rd, Northenden, Wythenshawe, Manchester M22 4DB United Kingdom

CH REP

MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61 5000 Aarau, Switzerland

MD


MDSS GmbH, Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany

EC REP



Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101 Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012


1 Потягніть котушку, щоб послабити натяг.

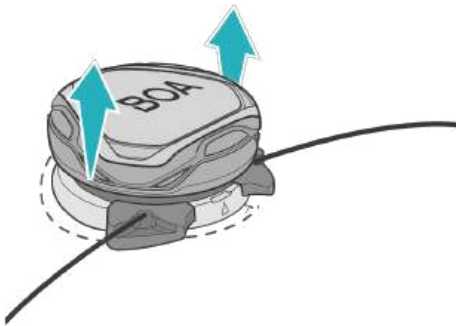

2 а. Вставте плоску викрутку в язичок зі стрілкою-індикатором.




б. За допомогою інструмента підніміть котушку вгору, доки картридж не вискочить із байонетного кріплення.

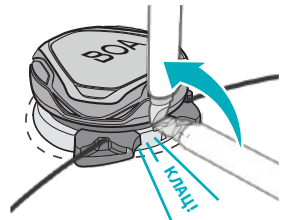


Примітка: язичок розташований зверху на монтажній пластині між отворами для шнурка.


3 Обріжте шнурок, щоб зняти стару котушку та шнурок із системи.

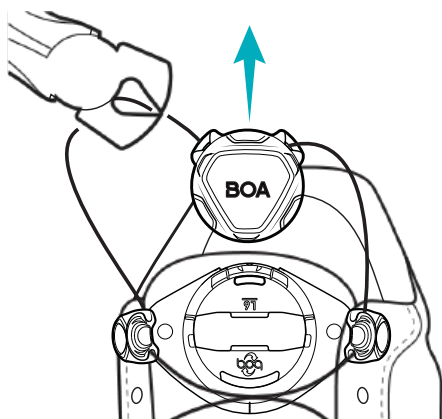


4 Протягніть шнурок через напрямні, як показано.

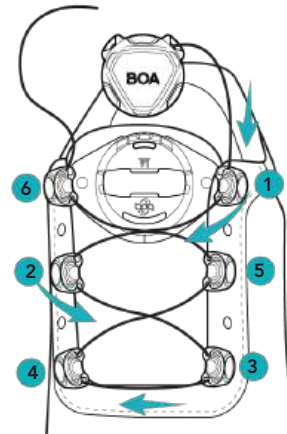

Шнурок можна протягнути прямо крізь напрямну (А) або завести на місце (В). За потреби шнурок легко вивільняється з напрямної для швидкого надягання чи знімання.

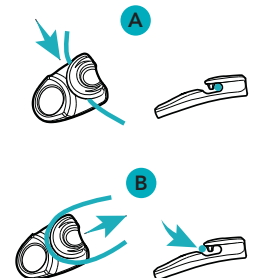

5 Візьміть нову котушку та натисніть вниз, щоб закрити її.

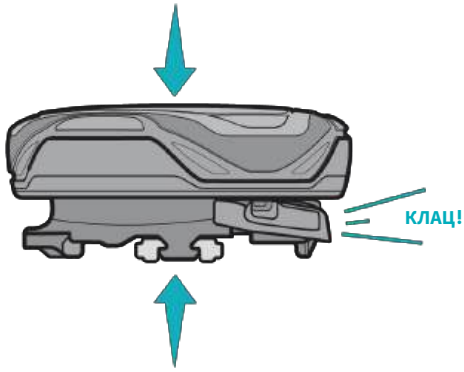


6 Поверніть, доки дві стрілки на задній частині котушки не співпадуть.




7 Закріпіть шнурок на котушці:


a) Протягніть правий шнурок через правий отвір для шнурка.

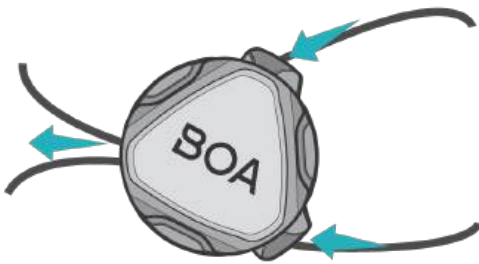

b) Визначте потрібну довжину шнурка. Залишайте запас не більше 15 см на кожен отвір для шнурка.

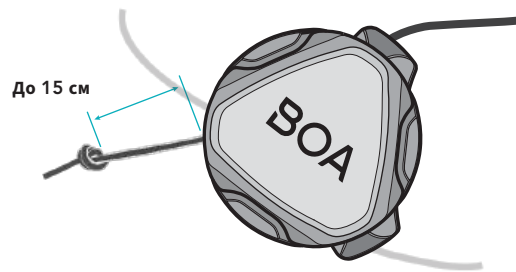

c) Зав'яжіть одинарний вузол. Обріжте кінчик, залишивши 4–7 мм за вузлом.

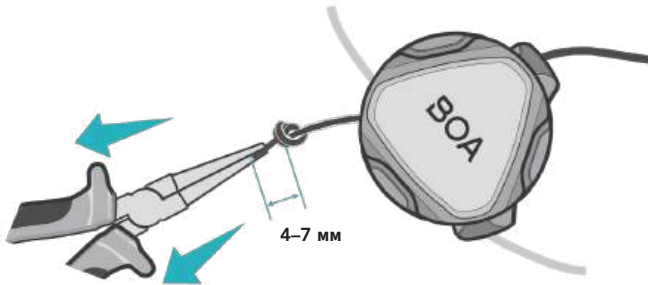


d) Втягніть вузол у отвір. Повторіть для протилежного боку котушки.




Примітка: Коли шнурок встановлено правильно, вузол і хвостик не мають бути видимими.

8 Втисніть котушку до упору в монтажну пластину.

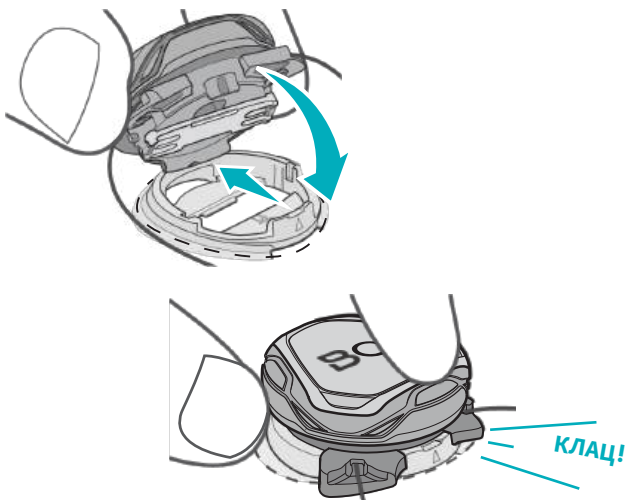

9 Прокрутіть механізм, щоб перевірити плавність роботи:

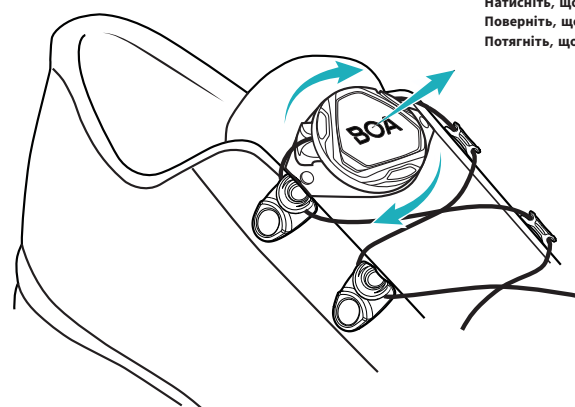

Натисніть, щоб увімкнути.
Поверніть, щоб затягнути.
Потягніть, щоб відпустити.

Примітка: Якщо механізм працює з натягом, змініть котушку (див. кроки 1–2) і перевірте, чи вузол і хвостик правильно посаджені (див. крок 7).