

Kit di impugnatura per bobina Click

Per ulteriori risorse visitare:
clickmedical.co/knowledge-base

AC-100-05, AC-101-05

GARANZIA

Il Click Reel è garantito per la vita del dispositivo in cui è stato originariamente installato. È richiesta la registrazione del Click Reel al momento della consegna del dispositivo originale.

Per registrarsi: <https://clickmedical.co/contact-us/cr-registration/>

GARANZIA

Per informazioni sulla garanzia di tutti i prodotti Click Medical: <https://clickmedical.co/terms/#warranty>

Clienti USA:

Contattare Help@ClickMedical.co

Tel: +1-970-670-7012

Clienti Internazionali:

Contattare il distributore locale.

Per le istruzioni in altre lingue: clickmedical.co/istruzioni


Per suggerimenti e linee guida sui materiali, consultare al sito

Scheda tecnica del materiale: clickmedical.co/mds

I prodotti Click Medical sono protetti da brevetto.


Per l'elenco completo vedere www.clickmedical.co/patents

Contenuto Kit Click Reel Grip:

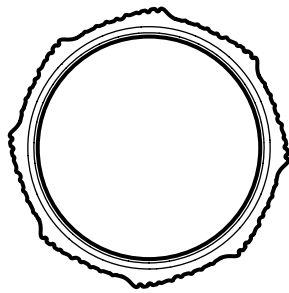

Impugnatura
Comfort x5 AC-
100-05

- O -

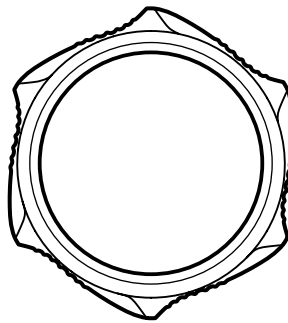

Power Grip x5
AC-101-05

Altri Materiali Necessari (non inclusi):



Spazzola




Colla Istantanea




Detergente per
superfici alcool
isopropilico o
simile

Preparazione della Superficie:

- 1 Pulire tutta la superficie del quadrante con alcol isopropilico (evidenziato in grigio).

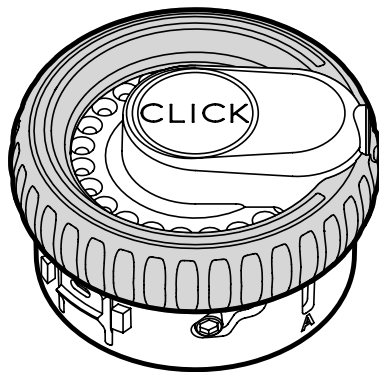


- 2 Pulire l'intera superficie interna dell'impugnatura con alcol isopropilico (evidenziato in grigio).

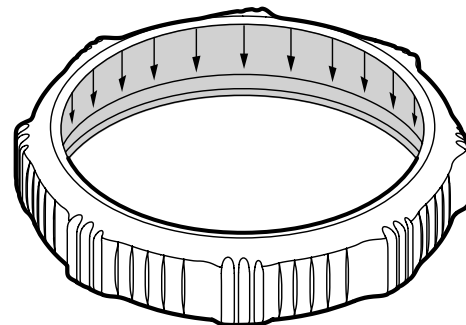

Applicazione dell'Adesivo:


3 Applicazione dell'adesivo:

1. Utilizzando il pennello, applicare l'adesivo sulla superficie interna dell'impugnatura.
2. Applicare l'adesivo sull'impugnatura del quadrante con il pennello.

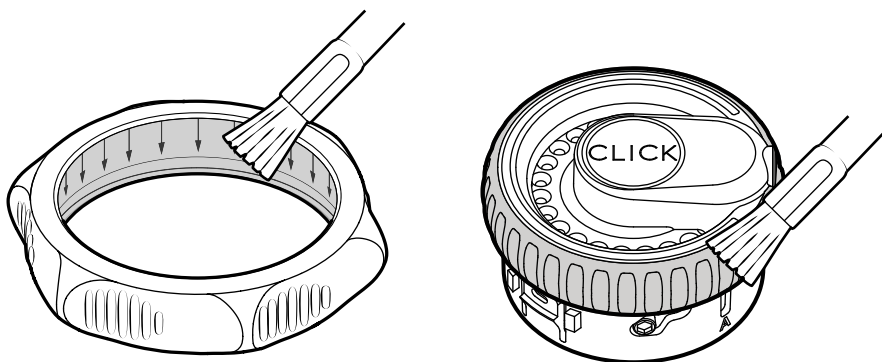


Fissare l'Impugnatura:


4. Trovare la parte inferiore dell'impugnatura. Sulla superficie interna dell'impugnatura sono presenti delle frecce che indicano la parte inferiore.

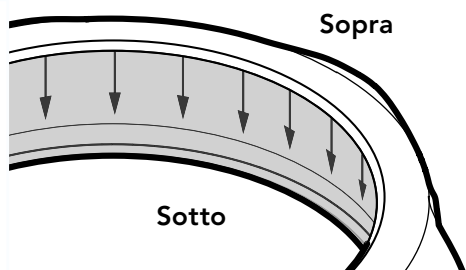


5. Assicurarsi che l'impugnatura sia orientata correttamente in modo che i cuscinetti delle dita siano allineati con la direzione di serraggio.

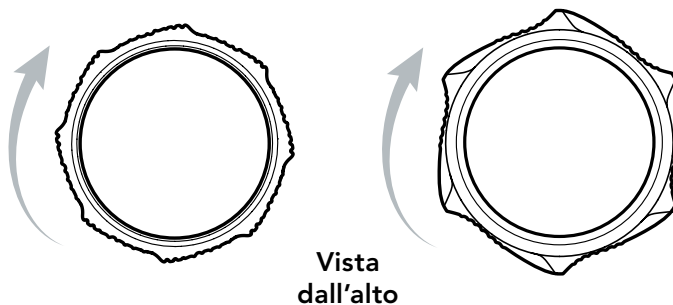

6. Far scorrere l'impugnatura sul quadrante mentre l'adesivo è ancora bagnato.

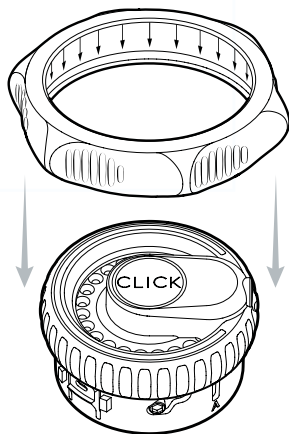

Consiglio: Per un aspetto ottimale, allineare 1 serie di lobi sull'impugnatura con la linea centrale della ruota dentata.

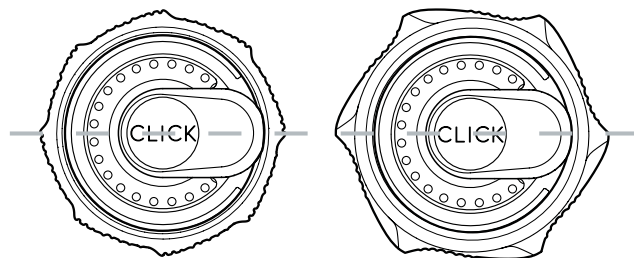

Finitura:

7. Lasciare che l'adesivo si asciughi completamente.



8. Una volta asciugato l'adesivo, verificare che l'impugnatura sia saldamente attaccata al quadrante.

9. Pulire l'adesivo in eccesso dal quadrante.

UK REP MDSS-UK RP LIMITED, 6 Wilmslow Road
Rusholme, M14 5TP Manchester
Regno Unito

CH REP MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Svizzera

MD MDSS GmbH, Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germania

EC REP 



Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101
Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012