




Revisionato maggio 2025

RevoLock®

Kit Laccio Porta A e Ghiera HC V2 & V3 BOA®

RP-310A

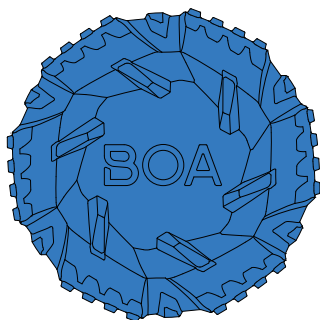

GARANZIA

www.clickmedical.co/terms/#warranty

Clienti USA:

Contatta direttamente Click Medical

Help@ClickMedical.co

Numero verde: +1 970 670 7012

Clienti Internazionali:

Contatta il tuo distributore locale.

I prodotti Click Medical sono protetti da brevetto. Per consultare l'elenco completo, visita il sito www.clickmedical.co/patents

Revisione 2023



Avviso

Il prodotto deve essere installato da un professionista esperto nella fabbricazione di RevoLock.

Il laccio è soggetto a usura. Ispezionare almeno ogni mese e sostituire ogni 6 mesi. In caso di rottura del laccio si può verificare una perdita di sospensione.

Non utilizzare su pazienti che soffrono di problemi ai nervi.

Tenere il laccio lontano da fiamme vive e bordi taglienti.


Fissare l'insero alla fodera prima di tensionare il sistema.

Consultare le avvertenze in altre lingue: clickmedical.co/advisories

RevoLock® RevoLock® V2 & V3 BOA Dial and HC Lace Kit Port A Contents:



Cordino Ghiera
V2 BOA®

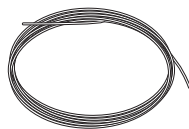

Laccio



Alimentatore del Laccio

Per visionare i video didattici sul funzionamento di Click Adjustability e RevoLock visita il sito

Visit www.clickacademy.co



RAP UK

MDSS-UK RP LIMITED, 6 Wilmslow Road
Rusholme, M14 5TP Manchester
Regno Unito

RAP CH

MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Svizzera

RAP

MDSS GmbH, Schiffgraben 41,
30175 Hannover, Germania


MD EC



Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101
Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012


1 Remove dial.

Locate the metal insert.
Insert a small flathead screwdriver between the metal insert and the dial body.
Gently pry the reel upwards.

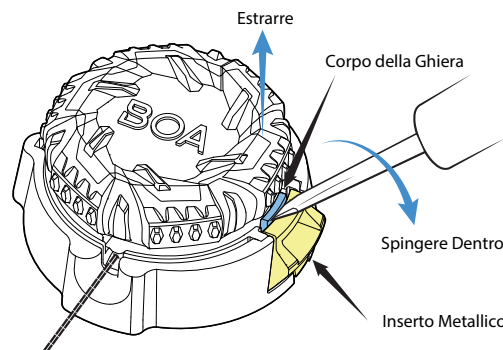


2 Rimuovere il laccio.


a) Assicurarsi che la ghiera sia aperta tirandola verso l'alto.

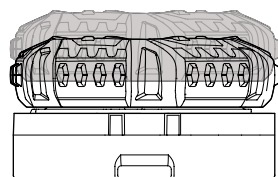

b) Estrarre tutti i lacci rimanenti dalla ghiera.

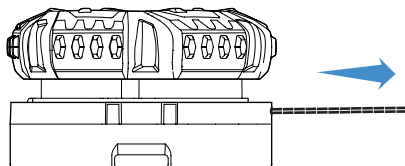


c) Individuare il grande foro di uscita del laccio nella base della ghiera. Agganciare l'occhiello del laccio nella ghiera con una puntina ed estrarre il laccio dalla ghiera.

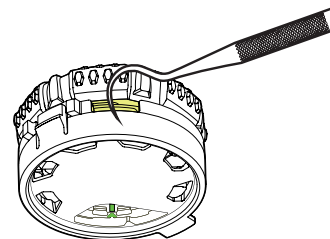


d) Tagliare il laccio ed estrarlo dalla ghiera. Quindi, rimuovere il laccio dal dispositivo.

Verificare di utilizzare la bobina di ricambio appropriata individuando la C sulla parte inferiore della ghiera.

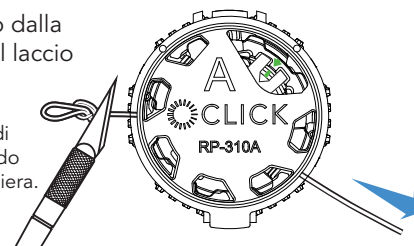


3 Allacciare il sistema.

Utilizzando l'alimentatore del laccio, passare il laccio dal collare della ghiera nel tubo, attraverso l'alloggiamento distale fino alla cavità.

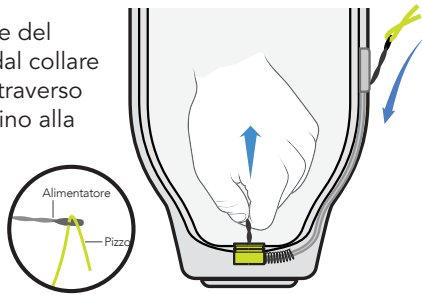


4 Allacciare la ghiera. Preparare la ghiera per l'allacciatura.

1 Assicurarsi che la ghiera sia agganciata spingendola verso il basso.

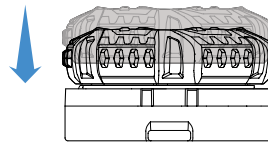


2 Girare la ghiera e assicurarsi che il segno verde sia allineato con la freccia verde. Diversamente, bloccare la base e ruotare la ghiera fino a quando i segni non si allineano.

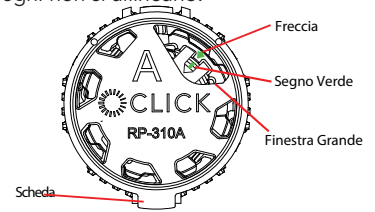

b) Individua le porte di allacciatura.


Porta di Ingresso del Laccio

Porta di Uscita del Laccio

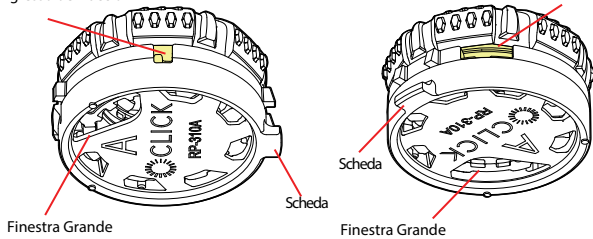


c) Passare il laccio attraverso la porta di ingresso e farlo uscire dalla porta di uscita del laccio sul lato opposto della ghiera.

Porta di Uscita del Laccio

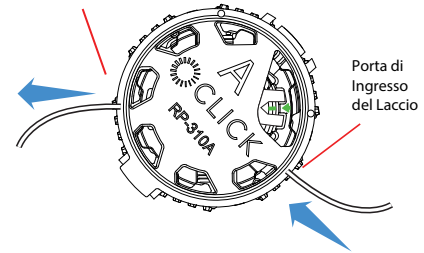

d) Legare il laccio facendo un nodo a mano.


1 Creare un'asola.

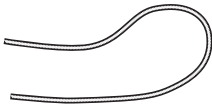

2 Fare un nodo a rovescio con l'occhiello.




3 Stringere il nodo. L'anello del nodo deve essere di circa 1 cm.

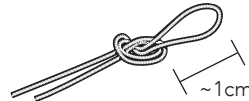

4 Tagliare la coda.




e) Tirare l'occhiello nella ghiera per far rientrare il nodo.

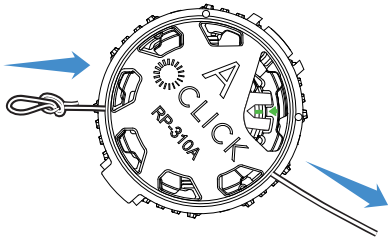

5 Installare la ghiera.

a) Inserire il piede della ghiera nel colletto.

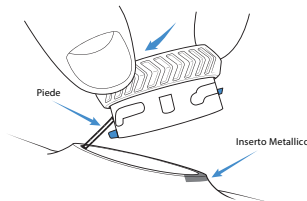


b) Premere la bobina con forza nel colletto (dovresti sentire un "click" quando è sicura).




6 Determinare la lunghezza del laccio.

Determinare la quantità di laccio necessaria per raggiungere l'esterno della presa e collegarlo alla fodera e all'inserito filettato.

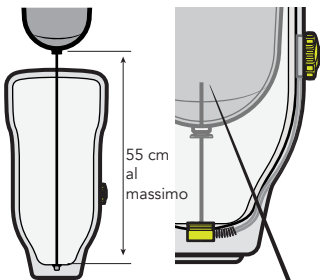

Utilizzando un alimentatore di lacci, inserire il laccio e fare un doppio nodo a rovescio.

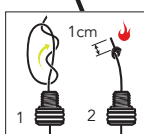


Note: la lunghezza massima del laccio non può superare i 55 cm.

7 Verificare il corretto funzionamento.

- Fissare l'inserito filettato alla fodera.
- Avvolgere il laccio.
- Estrarre la ghiera per rilasciarla.
- Estrarre la fodera e il laccio dalla presa.
- Avvolgere di nuovo il laccio.

Notes:

- Ispezionare regolarmente il laccio per verificare che non siano presenti segni di sfilacciamento o usure.
- Sostituire il laccio ogni 6 mesi.
- Tenere il laccio lontano da fiamme vive.

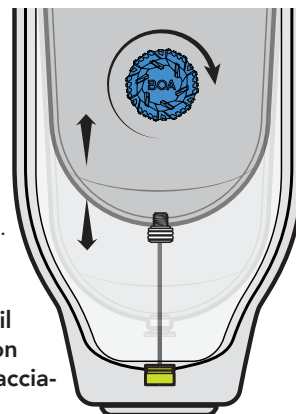

✓ Congratulazioni! Hai finito!

