




RevoLock®


V2 & V3 HC Lace Kit

For use with Port C Lace exit

RP-312

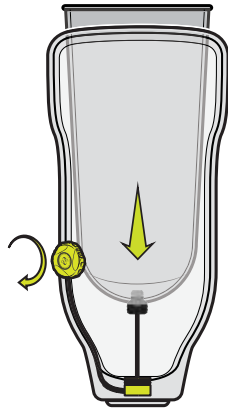

RevoLock® V2 & V3 HC Lace Kit Contents:

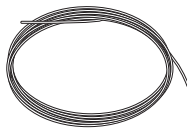

Lace



Lace Feeder

If the device utilizes the "A lace port" to route the lace to the distal end of the socket, you will utilize the **Port A Instructions**.



WARRANTY:

www.clickmedical.co/terms/#warranty

U.S. Customers:

Contact Click Medical directly

Help@ClickMedical.co

Help Line: +1 970 670 7012

International Customers:

Please contact your local distributor

Click Medical products are patent protected. For full list see www.clickmedical.co/patents

Revised 2023



Advisory

Must be installed by a professional trained in RevoLock fabrication.

Lace will wear. At minimum, inspect monthly and replace every 6 months.

Loss of suspension can occur if lace fails.

Do not use on patients with nerve issues.

Keep lace away from open flame and sharp edges.

Secure insert to liner before tensioning system.

See advisories in other languages: clickmedical.co/advisories

UK REP

MDSS-UK RP LIMITED, 6 Wilmslow Road
Rusholme, M14 5TP Manchester
United Kingdom

CH REP

MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

MD

MDSS GmbH, Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

EC REP




Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101
Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012

For video education on Click Adjustability and RevoLock operation
Visit www.clickacademy.co


1 Remove dial.

- Individuare l'inserto metallico.
- Inserire un piccolo cacciavite a testa piatta tra l'inserto metallico e il corpo della ghiera.
- Fare leva delicatamente sulla bobina verso l'alto.

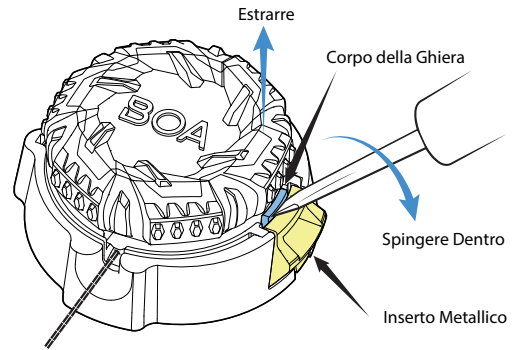


2 Rimuovere il laccio.


- Assicurarsi che la ghiera sia aperta tirandola verso l'alto.

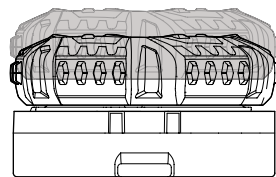

- Estrarre tutti i lacci rimanenti dalla ghiera.

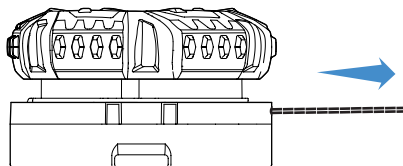


- Individuare la grande apertura di uscita del laccio nella base della ghiera. Agganciare l'occhiello del laccio nella ghiera con una puntina ed estrarre il laccio dalla ghiera.

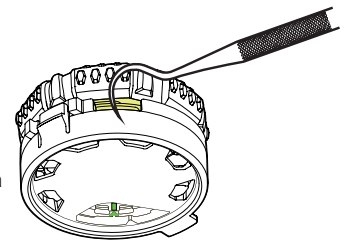

- Tagliare il laccio ed estrarlo dalla ghiera. Quindi rimuovere il laccio dal dispositivo.

Assicurarsi di utilizzare la bobina di ricambio appropriata individuando la C sulla parte inferiore della ghiera.

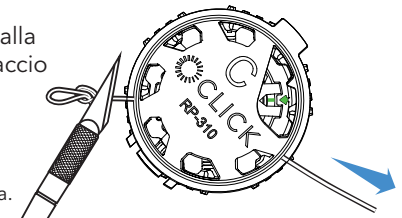


Se la bobina presenta una "A" sul fondo o utilizza la "porta laccio A" per indirizzare il laccio all'estremità distale dell'invasatura, è necessaria una bobina "Porta A". Utilizzare le istruzioni per la Porta A include in questo kit.





3 Allacciare il sistema.

Utilizzando l'alimentatore del laccio, inserire il laccio dal colletto della ghiera nel tubo, attraverso l'alloggiamento distale fino alla cavità.

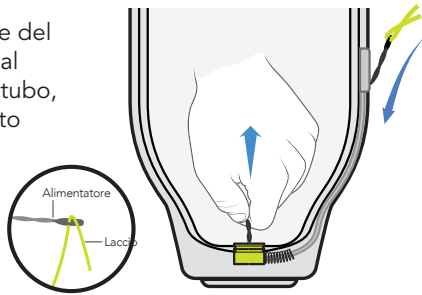


4 Allacciare la ghiera. Preparare la ghiera per l'allacciatura.


- 1 Assicurarsi che la ghiera sia agganciata spingendola verso il basso.
- 2 Girare la ghiera e assicurarsi che il segno verde sia allineato con la freccia verde. In caso contrario, bloccare la base e ruotare la ghiera finché i segni non si allineano.

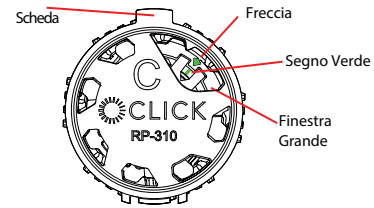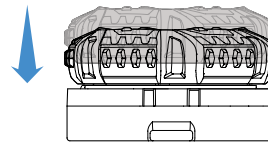

b) Individua le porte di allacciatura.


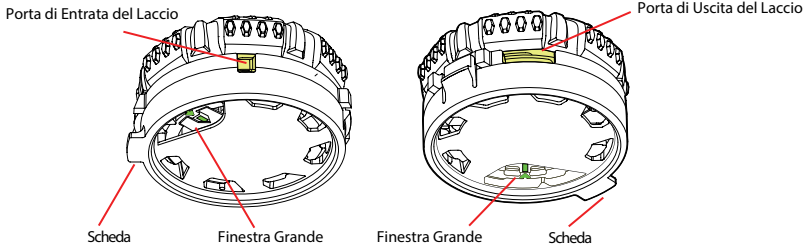


c) Passare il laccio attraverso la porta di ingresso e farlo uscire dalla porta di uscita del laccio sul lato opposto della ghiera.

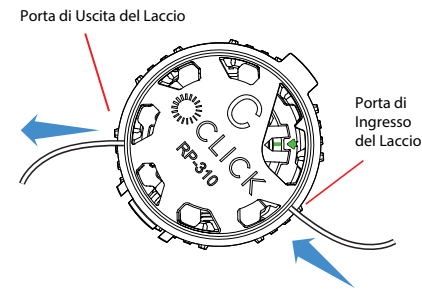


d) Legare il laccio facendo un nodo a mano.

- 1 Creare un'asola.
- 2 Realizzare un nodo a rovescio con l'occhiello.
- 3 Stringere il nodo. L'occhiello del nodo deve essere di circa 1 cm.
- 4 Tagliare la coda.

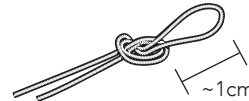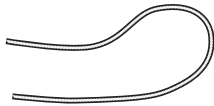


e) Tirare il cappio nella ghiera per fissare il nodo.

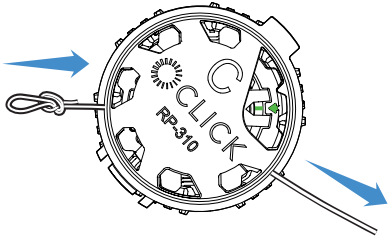

5 Installare la ghiera.

a) Inserire il piede della ghiera nel colletto.

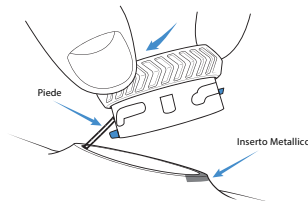


b) Premere la bobina con forza nel colletto (dovresti sentire un "click" quando è sicura).




6 Determinare la lunghezza del laccio.

Determinare la quantità di laccio richiesta per raggiungere l'esterno della presa e collegarla alla fodera e all'inserto filettato.

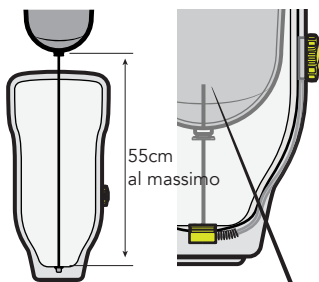


Utilizzando un alimentatore di lacci, inserire il laccetto ed eseguire un doppio nodo a rovescio.

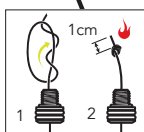

Note: la lunghezza massima del laccio non può superare i 55 cm.

7 Test for function.

- Fissare l'inserto filettato alla fodera.
- Avvolgere il laccio.
- Estrarre la ghiera per rilasciarla.
- Estrarre la fodera e il laccio dalla presa.
- Avvolgere di nuovo il laccio.

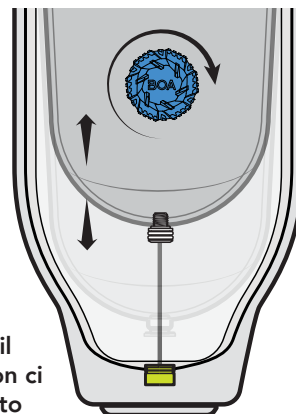

Notes:

- Ispezionare regolarmente il laccio per verificare che non ci siano segni di sfilciamento o di usura.
- Sostituire il laccio ogni 6 mesi.
- Tenere il laccio lontano da fiamme vive.

✓ **Congratulazioni!**
Hai finito!

