


### RevoLock® Contenuto del Kit Laccio Porta A HC V2 & V3



Laccio

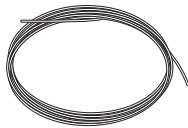


Alimentatore del laccio

Utilizza queste istruzioni per i dispositivi che utilizzano la "porta laccio A" per introdurre il laccio nell'estremità distale della cavità.


### 1 Rimuovere la ghiera.

Individuare l'inserto metallico.  
Inserire un piccolo cacciavite a testa piatta tra l'inserto metallico e il corpo della ghiera.  
Fare delicatamente leva sulla bobina verso l'alto.

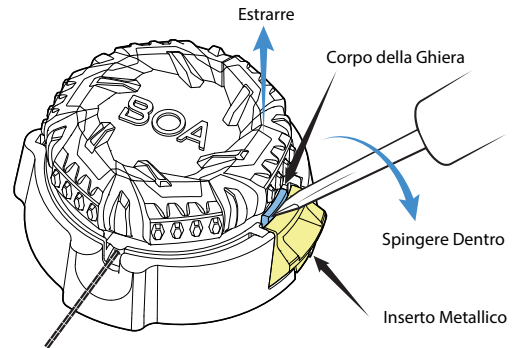


### 2 Rimuovere il laccio.


a) Assicurarsi che la ghiera sia aperta tirandola verso l'alto.

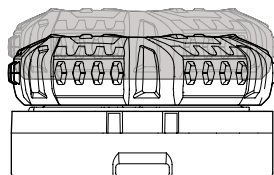

b) Estrarre tutti i lacci rimanenti dalla ghiera.

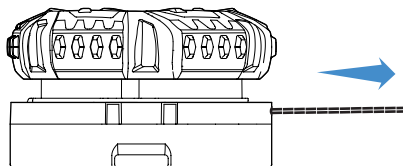


c) Individuare il grande foro di uscita del laccio nella base della ghiera. Agganciare l'occhiello del laccio nella ghiera con una puntina ed estrarre il laccio dalla ghiera.

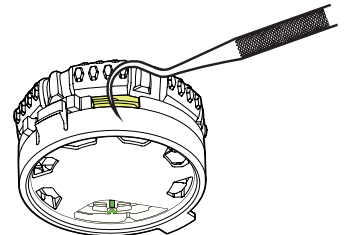

d) Tagliare il laccio ed estrarlo dalla ghiera. Quindi, rimuovere il laccio dal dispositivo

Verificare di utilizzare la bobina di ricambio appropriata individuando la C sulla parte inferiore della ghiera.

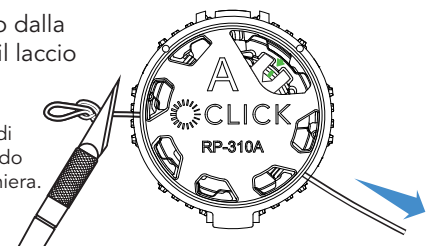

#### GARANZIA

[www.clickmedical.co/terms/#warranty](http://www.clickmedical.co/terms/#warranty)

#### Clienti USA:

Contatta direttamente Click Medical

Help@ClickMedical.co

Numero verde: +1 970 670 7012

#### Clienti Internazionali:

Contatta il tuo distributore locale.

I prodotti Click Medical sono protetti da brevetto. Per consultare l'elenco completo, visita il sito [www.clickmedical.co/patents](http://www.clickmedical.co/patents)

Revisione 2023

#### Avviso

Il prodotto deve essere installato da un professionista esperto nella fabbricazione di RevoLock.

Il laccio è soggetto a usura. Ispezionare almeno ogni mese e sostituire ogni 6 mesi. In caso di rottura del laccio si può verificare una perdita di sospensione.

Non utilizzare su pazienti che soffrono di problemi ai nervi.

Tenere il laccio lontano da fiamme vive e bordi taglienti.

Fissare l'inserto alla fodera prima di tensionare il sistema.

Consultare le avvertenze in altre lingue: [clickmedical.co/advisories](http://clickmedical.co/advisories)

**UK REP**

MDSS-UK RP LIMITED, 6 Wilmslow Road  
Rusholme, M14 5TP Manchester  
Regno Unito

**CH REP**

MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Svizzera

**MD**

MDSS GmbH, Schiffgraben 41,  
30175 Hannover, Germania

**EC REP**




Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101  
Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012

Per visionare i video didattici sul funzionamento di Click Adjustability e RevoLock visita il sito  
Visit [www.clickacademy.co](http://www.clickacademy.co)


### 3 Allacciare il sistema.

Utilizzando l'alimentatore del laccio, passare il laccio dal collare della ghiera nel tubo, attraverso l'alloggiamento distale fino alla cavità.

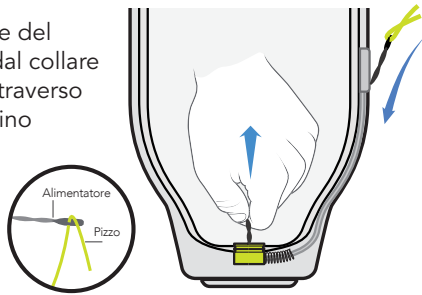


### 4 Allacciare la ghiera. Preparare la ghiera per l'allacciatura.


1 Assicurarsi che la ghiera sia agganciata spingendola verso il basso.

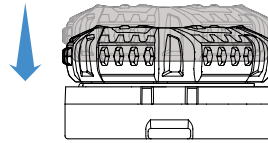


2 Girare la ghiera e assicurarsi che il segno verde sia allineato con la freccia verde. Diversamente, bloccare la base e ruotare la ghiera fino a quando i segni non si allineano.

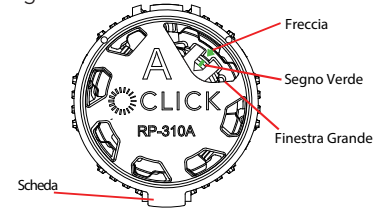

### b) Individua le porte di allacciatura.

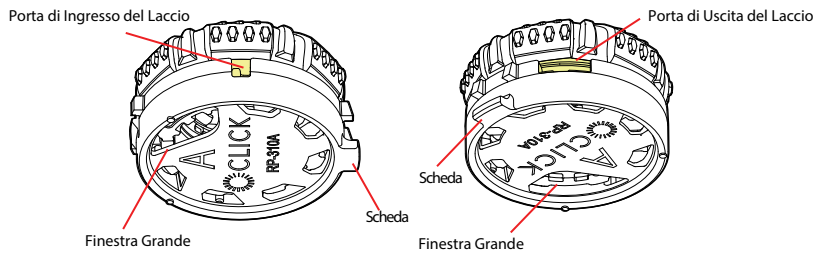


c) Passare il laccio attraverso la porta di ingresso e farlo uscire dalla porta di uscita del laccio sul lato opposto della ghiera.

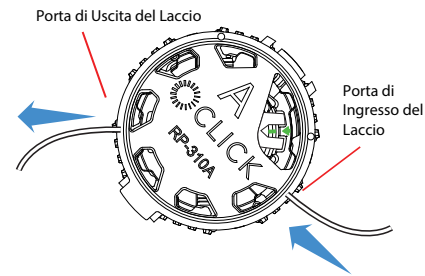

d) Legare il laccio facendo un nodo a mano.


1 Creare un'asola.

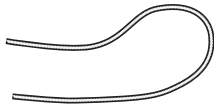

2 Fare un nodo a rovescio con l'occhiello.




3 Stringere il nodo. L'anello del nodo deve essere di circa 1 cm.

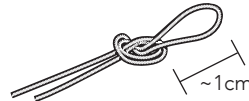

4 Tagliare la coda.




e) Tirare l'occhiello nella ghiera per far rientrare il nodo.

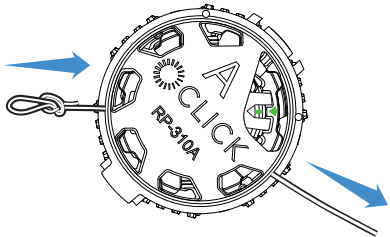

### 5 Installare la ghiera.

a) Inserire il piede della ghiera nel colletto.

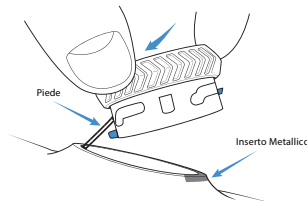


b) Premere la bobina con forza nel colletto (dovresti sentire un "click" quando è sicura).




### 6 Determinare la lunghezza del laccio.

Determinare la quantità di laccio necessaria per raggiungere l'esterno della presa e collegarlo all'inserto filettato.

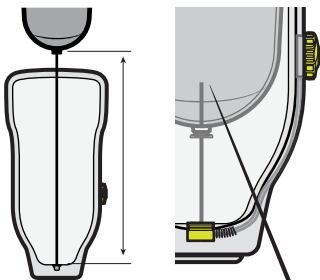

Utilizzando un alimentatore di lacci, inserire il laccio e fare un doppio nodo a rovescio.

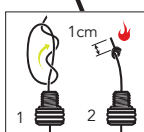


Note: la lunghezza massima del laccio non può superare i 55 cm.

### 7 Verificare il corretto funzionamento.

- Fissare l'inserto filettato alla fodera.
- Avvolgere il laccio.
- Estrarre la ghiera per rilasciarla.
- Estrarre la fodera e il laccio dalla presa.
- Avvolgere di nuovo il laccio.

#### Notes:

- Ispezionare regolarmente il laccio per verificare che non siano presenti segni di sfilacciamento o usure.
- Sostituire il laccio ogni 6 mesi.
- Tenere il laccio lontano da fiamme vive.

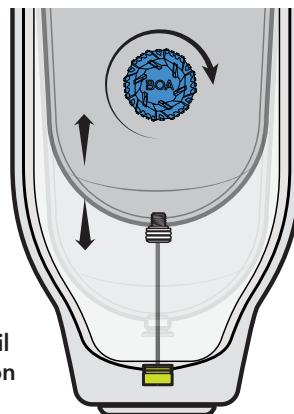

✓ **Congratulazioni! Hai finito!**

