

## GARANTIE

Le Click Reel est garanti pour la durée de vie de l'appareil dans lequel il est installé à l'origine. L'enregistrement du Click Reel est requis au moment de la livraison du dispositif original.

Pour s'enregistrer : <https://clickmedical.co/contact-us/cr-registration/>

## GARANTIE

Pour obtenir des informations sur la garantie de tous les produits de Click Medical: <https://clickmedical.co/terms/#warranty>.

## Clients Américains:

Contact [Help@ClickMedical.co](mailto:Help@ClickMedical.co)

Tel: +1-970-670-7012

## Clients Internationaux:

Veillez contacter votre distributeur local. Voir les instructions dans d'autres langues : [clickmedical.co/instructions](http://clickmedical.co/instructions)


Pour les suggestions et les directives concernant les matériaux, veuillez vous référer à la page **Fiche de données du matériel**:

[clickmedical.co/mds](http://clickmedical.co/mds)

Les produits de Click Medical sont protégés par des brevets.


Pour la liste complète, voir [www.clickmedical.co/patents](http://www.clickmedical.co/patents)

## Contenu du kit Click Reel Grip:

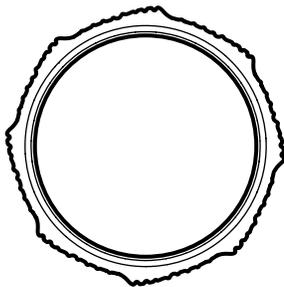

Comfort Grip x5  
AC-100-05

- OR -

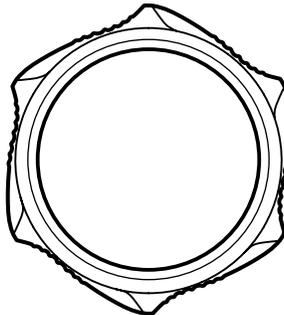

Power Grip x5  
AC-101-05

## Autres Matériaux Nécessaires (non fournis):



Brosse




Contact Barge à  
ciment ou similaire




Nettoyant de  
surface Alcool  
isopropylique ou  
similaire

## Préparation de la Surface:

- 1 Nettoyez toute la surface du cadran avec de l'alcool isopropylique (surligné en gris).

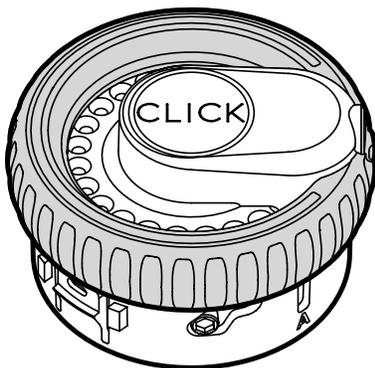


- 2 Nettoyez toute la surface intérieure de la poignée avec de l'alcool isopropylique (surligné en gris).

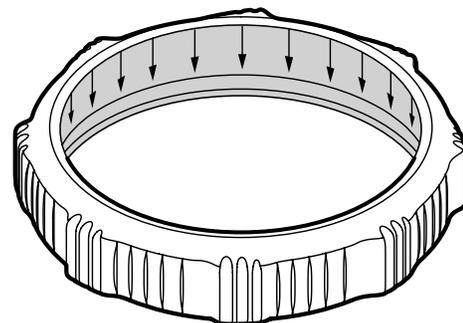

## Application adhésive:


### 3 Application de l'adhésif:

1. à l' aide du pinceau, appliquez l'adhésif sur la surface intérieure de la poignée.
2. Appliquez l'adhésif sur la poignée du cadran à l'aide du pinceau.

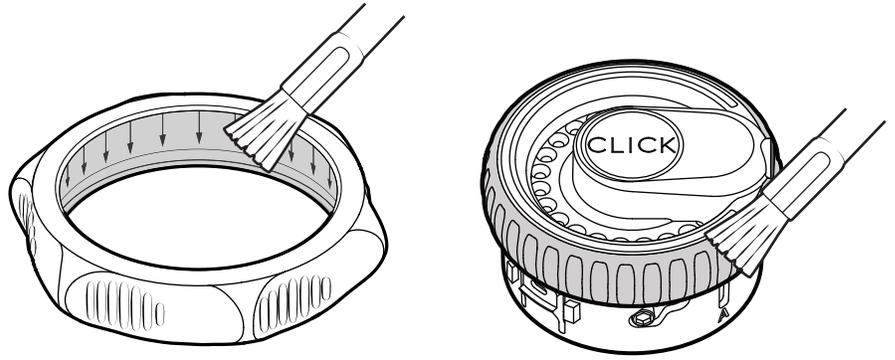


## Fixation de la poignée:


- 4 Identifiez le fond de la poignée. Des flèches sur la surface intérieure de la poignée indiquent le fond.

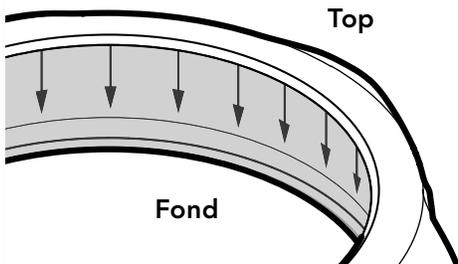


- 5 Veillez à ce que la poignée soit correctement orientée de manière à ce que les coussinets des doigts soient alignés avec le sens du serrage.

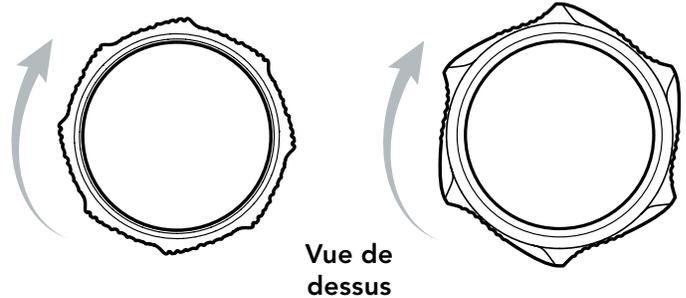

- 6 Faites glisser la poignée sur le cadran alors que l'adhésif est encore humide.

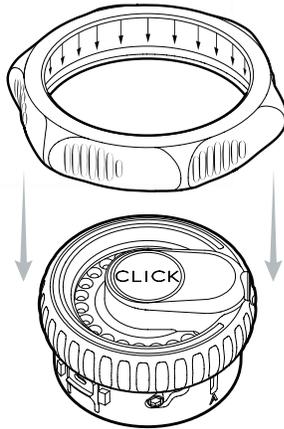

**Conseil de pro :** Pour une meilleure apparence, alignez un jeu de lobes sur la poignée avec la ligne centrale du monoposte.

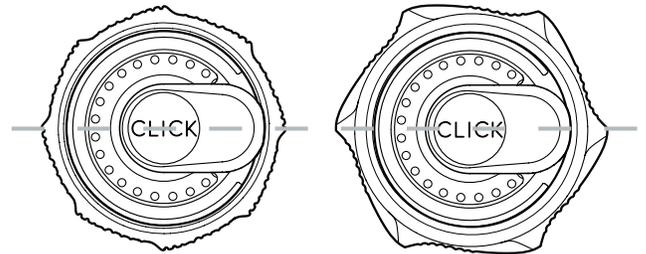

## Finition:

- 7 Laissez un temps suffisant pour que la colle sèche.



- 8 Après le séchage de la colle, vérifiez que la poignée est bien fixée au cadran.

- 9 Nettoyez l'excès d'adhésif sur le cadran.

**UK REP** MDSS-UK RP LIMITED, 6 Wilmslow Road  
Rusholme, M14 5TP Manchester  
United Kingdom

**CH REP** MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Suisse

**MD** MDSS GmbH, Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Allemagne

**EC REP** 



Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101  
Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012