



CLICK MEDICAL

Kit Laccio HC e Ghiera V2 & V3 BOA®

Da utilizzare con l'uscita laccio Porta

RP-310

RevoLock®

Revisionato maggio 2025



GARANZIA

www.clickmedical.co/terms/#warranty

Clienci USA:

Contatta direttamente Click Medical

Help@ClickMedical.co

Numero verde: +1 970 670 7012


Clienci Internazionali:

Contatta il tuo distributore locale.

I prodotti Click Medical sono protetti da brevetto. Per consultare l'elenco completo, visita il sito

www.clickmedical.co/patents

Revisione 2023

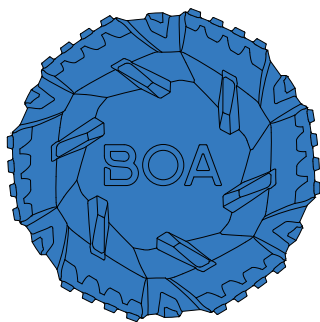

RevoLock® Kit Laccio HC e Ghiera V2 & V3 BOA® Contenuto:



Cordino Ghiera V2 BOA®



Laccio



Alimentatore di Lacci

Se il dispositivo utilizza la "porta laccio A" per introdurre il laccio all'estremità distale della cavità, è necessaria una bobina "Porta A". Contattare il proprio distributore per ricevere questo pezzo, RP-310A.



RAP UK

MDSS-UK RP LIMITED, 6 Wilmslow Road
Rusholme, M14 5TP Manchester
Regno Unito

RAP CH

MDSS CH GmbH, Laurenzvorstadt 61
5000 Aarau, Svizzera

RAP
MD EC

MDSS GmbH, Schiffgraben 41,
30175 Hannover, Germania




Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101
Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012

Per visionare i video didattici sul funzionamento di Click Adjustability e RevoLock visita il sito

Visit www.clickacademy.co


1 Rimuovere la ghiera.

Individuare l'inserito metallico.
Inserire un piccolo cacciavite a testa piatta tra l'inserito metallico e il corpo della ghiera.
Fare delicatamente leva sulla bobina verso l'alto.

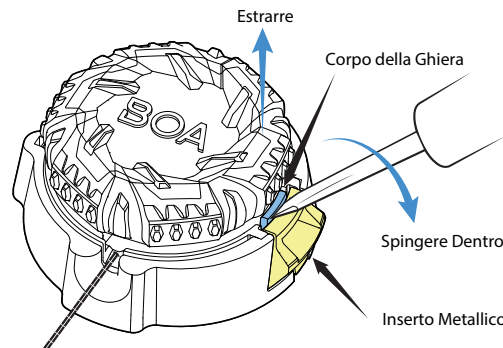


2 Rimuovere il laccio.


a) Assicurarsi che la ghiera sia aperta tirandola verso l'alto

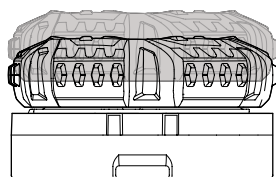

b) Estrarre tutti i lacci r imanenti dalla ghiera.

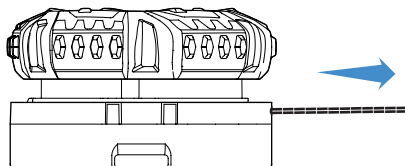


c) Individuare il grande foro di uscita del laccio nella base della ghiera. Agganciare l'occhiello del laccio nella ghiera con una puntina ed estrarre il laccio dalla ghiera.

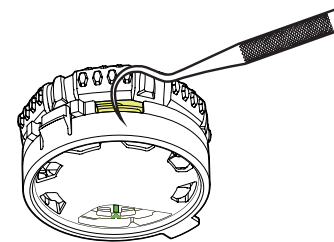

d) Tagliare il laccio ed estrarlo dalla ghiera. Quindi rimuovere il laccio dal dispositivo.

Assicurarsi di utilizzare la bobina di ricambio corretta individuando la C sulla parte inferiore della ghiera.

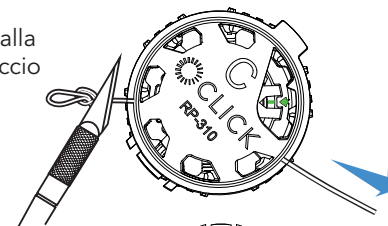


Se la bobina riporta una "A" sul fondo o utilizza la "porta laccio A" per convogliare il laccio all'estremità distale della presa, è necessaria una bobina "Porta A".




3 Allacciare il sistema.

Utilizzando l'alimentatore del laccio, passare il laccio dal collare della ghiera nel tubo, attraverso l'alloggiamento distale fino alla cavità.

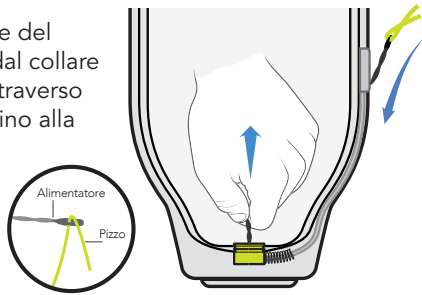


4 Allacciare la ghiera. Preparare la ghiera per l'allacciatura.


1 Assicurarsi che la ghiera sia agganciata spingendola verso il basso.

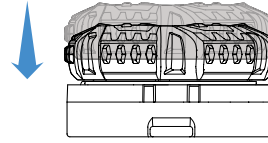


2 Girare la ghiera e assicurarsi che il segno verde sia allineato con la freccia verde. Diversamente, bloccare la base e ruotare la ghiera fino a quando i segni non si allineano.

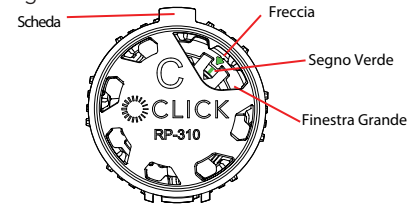

b) Individua le porte di allacciatura.

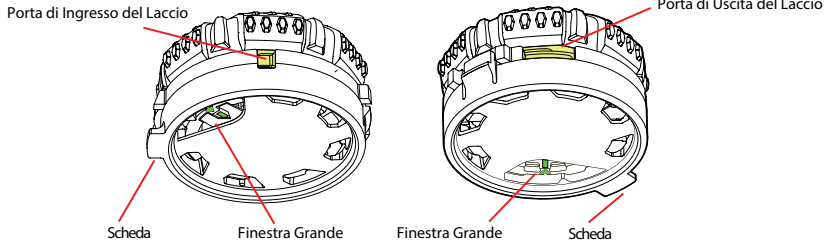


c) Passare il laccio attraverso la porta di ingresso e farlo uscire dalla porta di uscita del laccio sul lato opposto della ghiera.

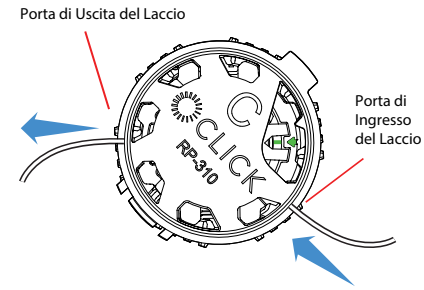

d) Legare il laccio facendo un nodo a mano.


1 Creare un'asola.

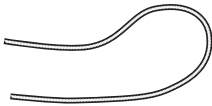


2 Fare un nodo a rovescio con l'occhiello.




3 Stringere il nodo. L'anello del nodo deve essere di circa 1 cm.

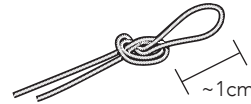

4 Tagliare la coda.

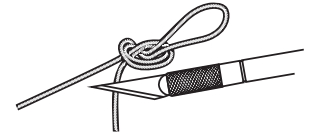


e) Tirare l'occhiello nella ghiera per far rientrare il nodo.

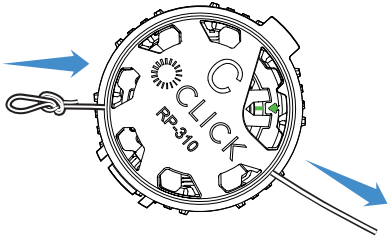

5 Installare la ghiera.

a) Inserire il piede della ghiera nel colletto.

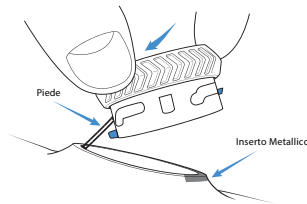


b) Premere la bobina con forza nel colletto (dovresti sentire un "click" quando è sicura).




6 Determinare la lunghezza del laccio.

Determinare la quantità di laccio necessaria per raggiungere l'esterno della presa e collegarlo alla fodera e all'inserito filettato.

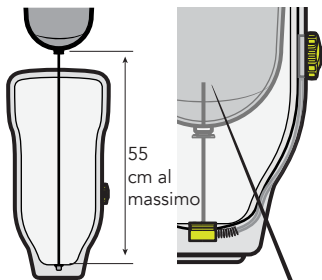


Utilizzando un alimentatore di lacci, inserire il laccio e fare un doppio nodo a rovescio.

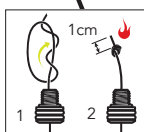

Nota: la lunghezza massima del laccio non può superare i 55 cm.

7 Verificare il corretto funzionamento.

- Fissare l'inserito filettato alla fodera.
- Avvolgere il laccio.
- Estrarre la ghiera per rilasciarla.
- Estrarre la fodera e il laccio dalla presa.
- Avvolgere di nuovo il laccio.

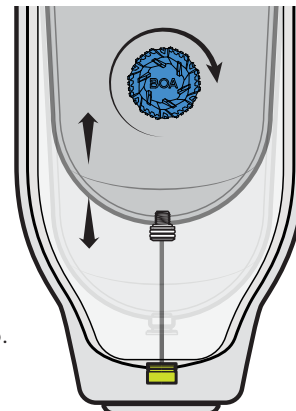

Notes:

- Ispezionare regolarmente il laccio per verificare che non siano presenti segni di sfilacciamento o usure.
- Sostituire il laccio ogni 6 mesi.
- Tenere il laccio lontano da fiamme vive.

✓ **Congratulazioni!**
Hai finito!

