



Contenu du kit de laçage QuickFit® Large

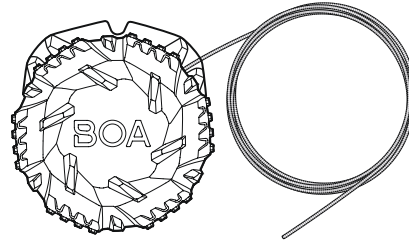


Molette BOA® M4
avec lacet de 1,3 m (x2)

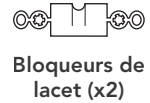


Bloqueurs de
lacet (x2)



Rivets (x32 rivets
mâles et femelles)

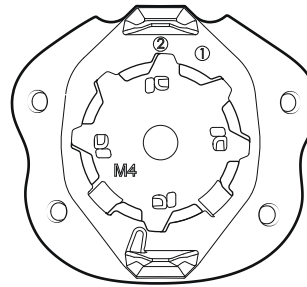

Boîtiers de
molette M4 (x2)

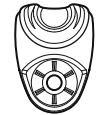

Guides
QuickLace (x20)

Conseils d'installation :

Utilisez l'outil QuickFit™ (Fôret de 3,2 mm ou autre outil) pour percer les trous nécessaires.

Si vous utilisez des trous existants pour les guides QuickLace, retirez les œillets métalliques ou en plastique afin d'assurer une bonne fixation des rivets.

Vous pouvez positionner les rivets manuellement pour vérifier l'ajustement, mais ils doivent être fixés avant d'appliquer une force de serrage importante sur le lacet avec la molette BOA.

Appuyez sur les rivets à 90° avec l'outil QuickFit™. L'utilisation d'un outil ou d'une autre méthode est déconseillée ; une pression en biais risque d'entraîner une mauvaise fixation des rivets.

Fixez la molette BOA sur la partie la plus épaisse et la plus robuste de la languette.

Outils recommandés :

- Outil QuickFit™
- Marqueur
- Pince coupante



Advisory

L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié. Le lacet s'use. Il est recommandé de l'inspecter au moins une fois par mois. Un serrage excessif peut réduire la circulation sanguine. Ne pas utiliser chez les patients souffrant de problèmes nerveux. Tenir le lacet éloignée des objets tranchants. Consulter les avertissements dans d'autres langues : clickmedical.co/advisories



GARANTIE :

www.clickmedical.co/terms/#warranty


Clients américains :

Contactez Click Medical directement - Help@ClickMedical.co
Assistance téléphonique: +1 970 670 7012


Clients internationaux :

Veuillez contacter votre distributeur local : Janton


- 1 Déterminez l'emplacement des guides à l'aide des instructions d'installation. Percez les trous à l'aide de l'outil QuickFit™ (Fôret de 3 mm).

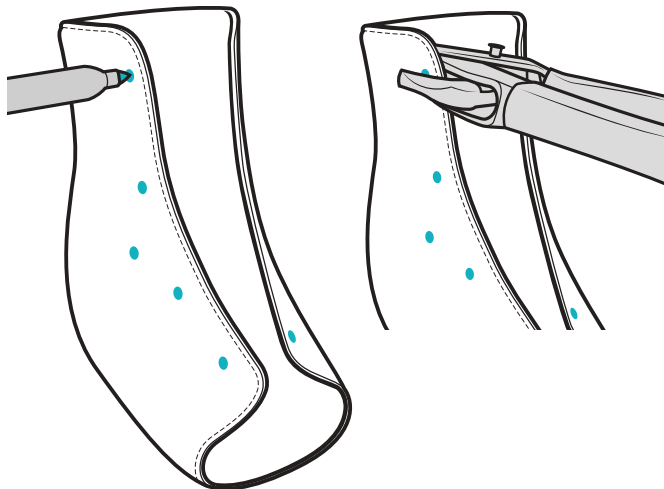

- 3 Une fois le positionnement du guide satisfaisant, fixez les rivets à l'aide de l'outil de pose. Répétez l'opération pour tous les guides.

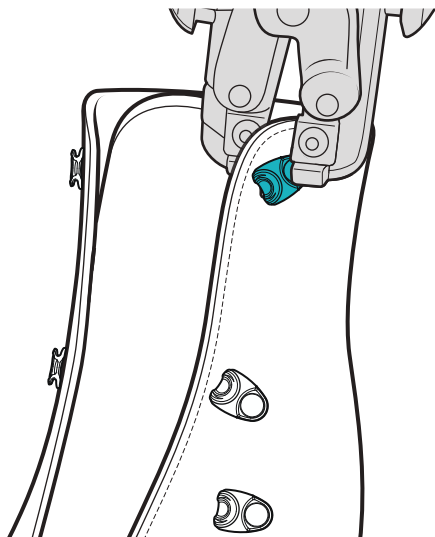


- 2 a) Fixez les guides QuickLace en insérant le rivet mâle depuis l'intérieur du dispositif et à travers le guide QuickLace. b) Enclenchez le rivet femelle sur le guide QuickLace, en maintenant ce dernier contre la chaussure.

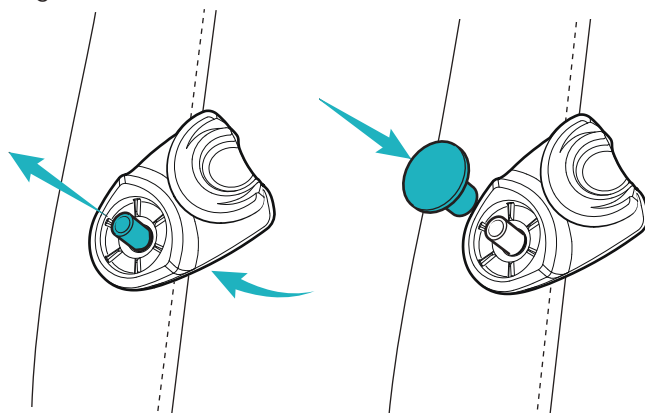


- 4 Déterminez l'emplacement de la molette. Prévoyez un dégagement de 1 cm entre le haut de la languette et le haut du boîtier.


Marquez l'emplacement des 4 trous.

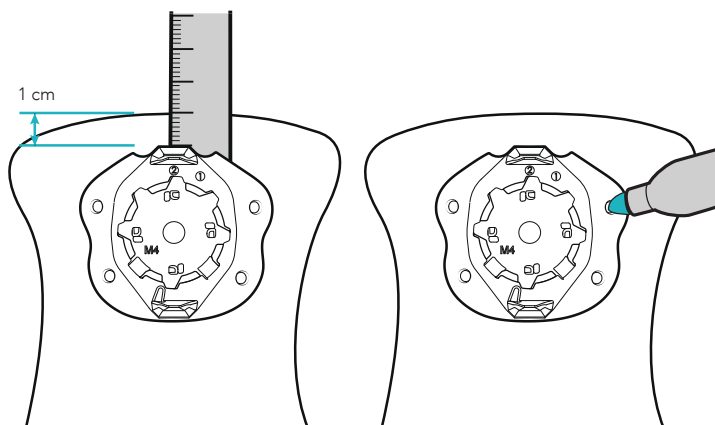


- 5 Percez un trou de 3 mm (1/8") à l'aide de l'outil QuickFit™.

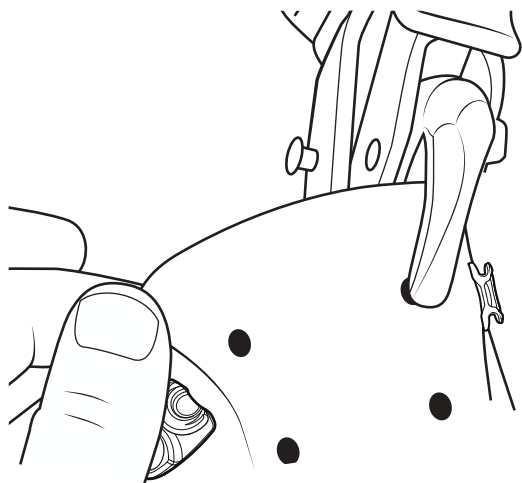


- 6 Fixez le boîtier du cadran à la languette. Enclenchez les rivets comme décrit à l'étape 2. Si le positionnement vous convient, fixez-le à l'aide de l'outil QuickFit™.

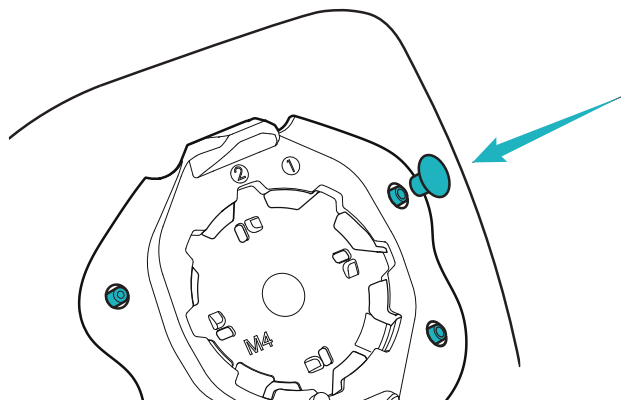


- 7 Passez le lacet dans les guides comme indiqué.

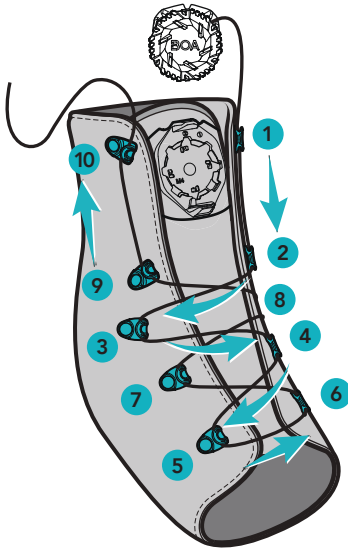

Le lacet peut être inséré directement dans le guide (A) ou tiré en place (B).

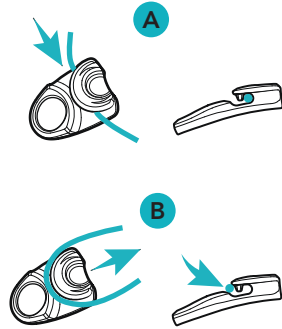


- 8 Tendez le lacet au niveau des croisements et mesurez environ 15 cm de lacet du dernier guide jusqu'à l'arrière du cadran. Marquez puis coupez le lacet avec une pince coupante.

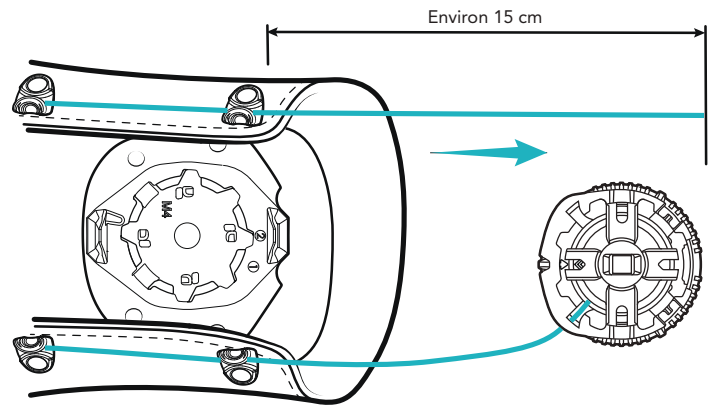


- 9 Introduisez l'extrémité libre du lacet dans l'espace prévu à cet effet, au-dessus du bord en plastique, et non en dessous. Engagez ensuite le lacet à travers le cadran jusqu'à ce qu'il ressorte par le bas.


Assurez-vous que les flèches soient alignées. Si ce n'est pas le cas, faites tourner le cadran en maintenant la base jusqu'à ce que les flèches soient alignées.

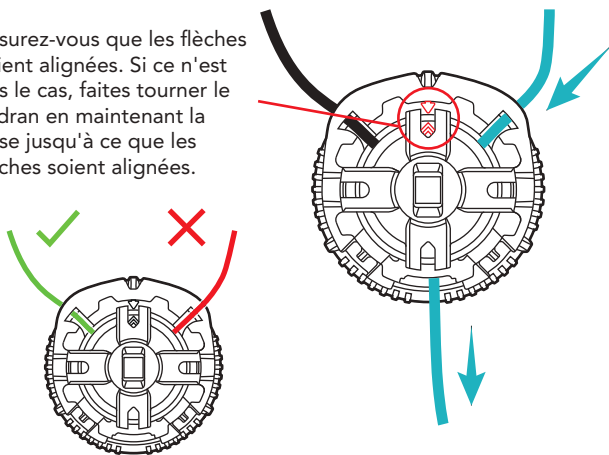

- 10 Passez le lacet dans le bloqueur de lacet comme indiqué ci-dessous (A) et laissez environ 5 mm de fil. Serrez le noeud en laissant les 5 mm de fil (B). Cassez la base plate du bloqueur de lacet en détachant le double cercle du lacet de sa base (C), puis tirez fermement le double cercle avec le noeud dans le corps du cadran (D).

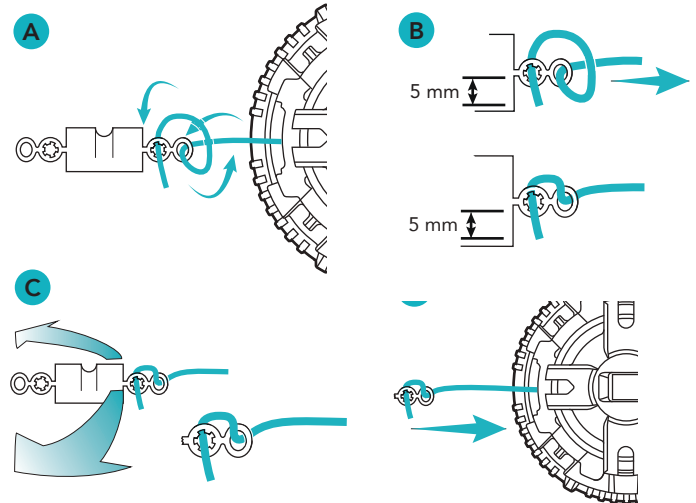

- 11 Alignez l'encoche de la base du cadran avec le chiffre « 1 » sur le boîtier du cadran et insérez le cadran dans le boîtier. Tournez le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'encoche indique le chiffre « 2 » sur le collier.

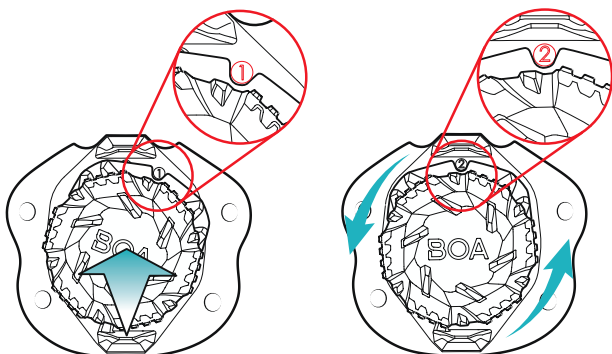

- 12 Testez le fonctionnement du système. Tournez le cadran dans le sens horaire pour serrer le lacet et tirez-le pour le détendre. Le lacet peut être retiré facilement du guide pour enfiler ou retirer rapidement le lacet.

