

Instrucciones de sustitución para:

RP0200-130-05, Kit de sustitución de dial y cordón QuickFit® - Negro
 RP0200-130-W, Kit de sustitución de dial y cordón QuickFit® - Blanco



Ayuda e instrucciones en vídeo: clickmedical.co/quickfit-lacer

Contenido del kit de repuesto:



1x repuesto
Cordón de acero, 1,5 m



1x carrete BOA® de repuesto

Compatible con:

QFL-130-B-2, QuickFit® Lacer - Pack doble negro
 QFL-130-W-2, QuickFit® Lacer - Pack doble blanco



Aviso

Debe instalarlo un profesional cualificado. El cordón se desgasta con el uso. Como mínimo, revise una vez al mes. Un ajuste excesivo puede reducir la circulación. No usar en pacientes con problemas nerviosos. Mantenga el cordón alejado de bordes afilados.

Consulte los avisos en otros idiomas: clickmedical.co/advisories



GARANTÍA:

www.clickmedical.co/terms/#warranty
 Clientes de EE. UU.: Póngase en contacto directamente con Click Medical Help@ClickMedical.co Línea de ayuda: +1 970 670 7012 Clientes internacionales: Póngase en contacto con su distribuidor local

UK REP

Parkway House, Palatine Rd, Northenden, Wythenshawe, Manchester M22 4DB Reino Unido

CH REP

MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61 5000 Aarau, Suiza

MD


MDSS GmbH, Schiffgraben 41 30175 Hannover, Alemania

EC REP



Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101 Steamboat Springs, CO 80487, EE. UU. +1-970-670-7012


- 1 Tire del carrete para abrirlo y liberar la tensión.

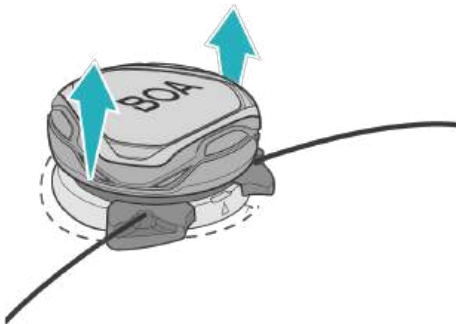

- 2 a. Introduzca un destornillador de punta plana en la pestaña con el indicador de flecha.




b. Con la herramienta, haga palanca hacia arriba en el carrete hasta que el cartucho salte y se libere del bayoneta.

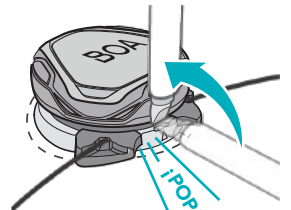


Nota: La pestaña se encuentra en la parte superior de la placa de montaje, entre los orificios del cordón.


- 3 Corte el cordón para retirar del sistema el carrete y el cordón antiguos.

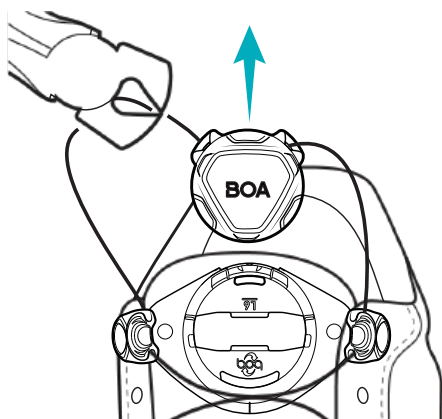


- 4 Pase el cordón por las guías tal y como se muestra.

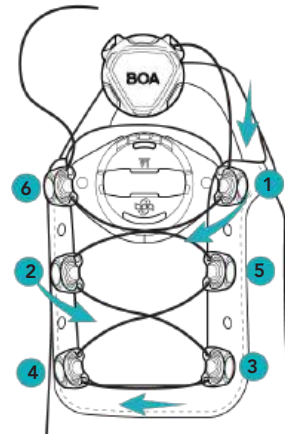

El cordón puede pasarse recto por la guía (A) o encajarse tirando de él (B). El cordón puede soltarse de la guía de un tirón para poner o quitar rápidamente.

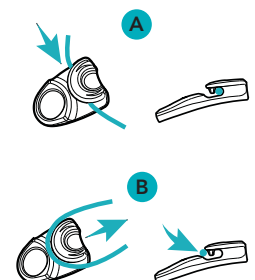

- 5 Coge el carrete nuevo y presiona hacia abajo para cerrarlo.

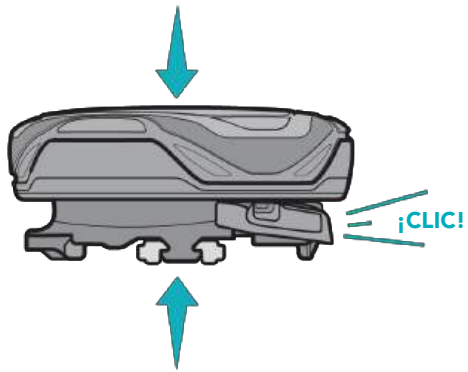


- 6 Gira hasta que las dos flechas de la parte trasera del carrete queden alineadas.




- 7 Fija el cordón al carrete:


a) Pasa el cordón derecho por el ojal derecho.

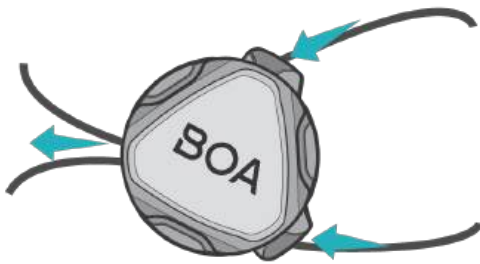


b) Calcula la longitud de cordón necesaria. Deja como máximo 15cm de holgura de cordón por cada ojal.

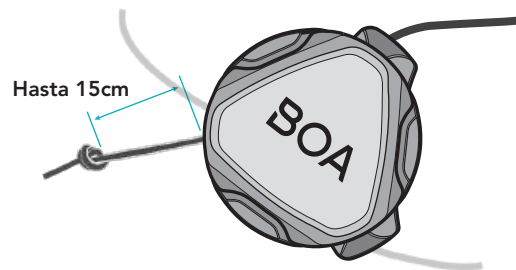


c) Haz un nudo simple. Corta el cabo dejando 4-7mm después del nudo.

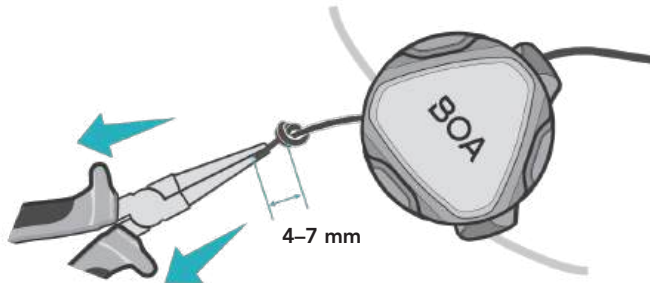


d) Mete el nudo en el orificio. Repite en el lado opuesto del carrete.

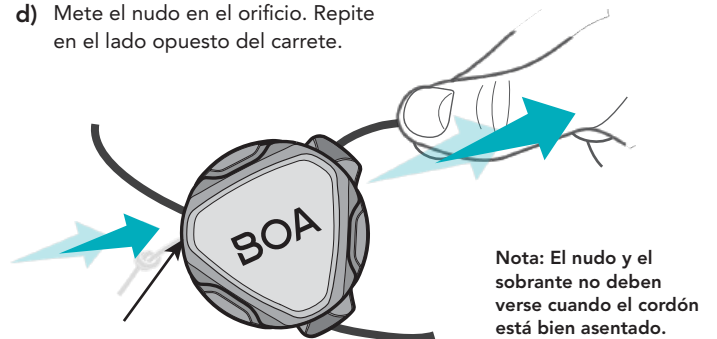

- 8 Encaja el carrete por completo en la placa de montaje.

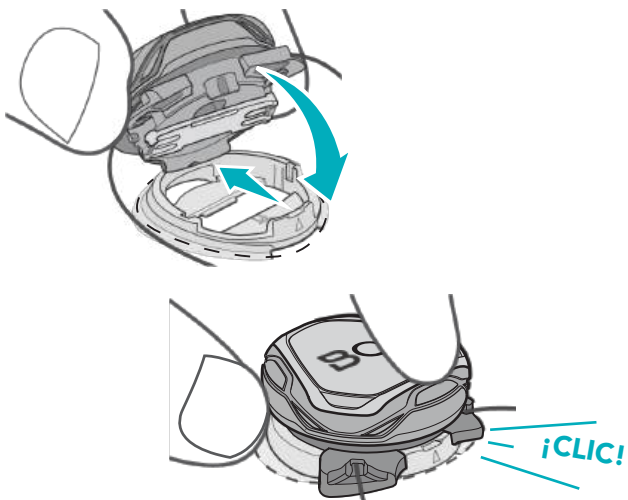

- 9 Acciona el sistema para comprobar que funciona con suavidad:

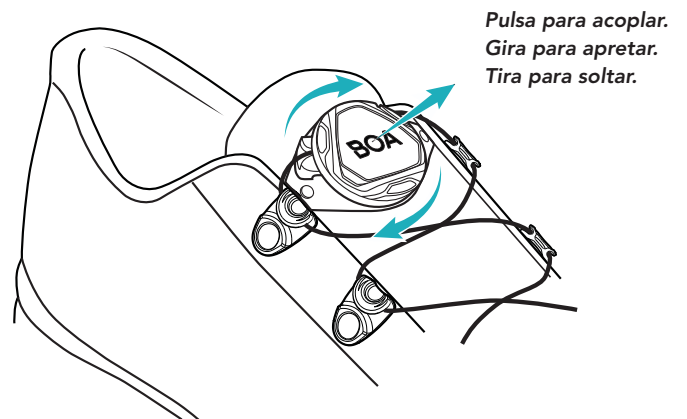

Nota: Si el sistema va áspero, retira el carrete (ver pasos 1-2) y comprueba que el nudo y el sobrante estén bien asentados (ver paso 7).