



CLICK クイックフィット レーサー ラージ



MEDICAL

QFL-230-B-2

2026年7月改訂

詳細については、
clickmedical.co/knowledge-base
をご覧ください。

クイックフィットレーサー LG キット内容:

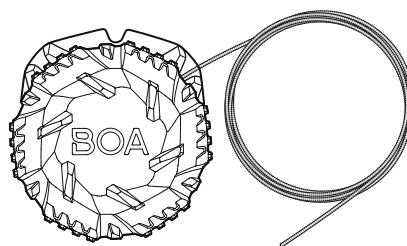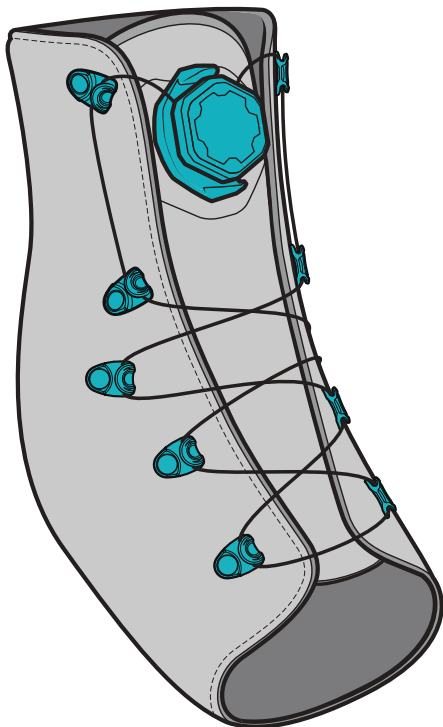


BOA® M4 ダイアル
(1.3m レース付き)×2



レースロック(×2)



リベット
(ポストとキャップ×32)

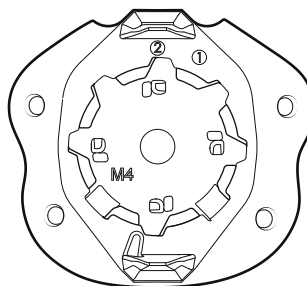

M4 ダイアルハウジング(×2)



クイックレースガイド(×20)

取り付けのヒント:

QuickFit™ ツール 1/8インチポンチまたはその他の工具を使用して、必要な穴を開けてください。

クイックレースガイド用の既存の穴を使用する場合は、リベットを確実に固定するために、アイレットから金属またはプラスチック製のグロメットを取り外してください。

リベットはフィット確認のために手でカチッとはめ込むことができますが、リールでレースに大きな締め付け力をかける前にリベットを取り付けてください。

リベットをプレスするQuickFit™ツールまたはその他の方法で90度に回転させてください。斜めに押すとリベットがしっかりと固定されません。

舌の厚みのある/丈夫な部分にダイアルを固定してください。

推奨ツール:

- QuickFit™ツール
- マーカーペン
- ワイヤークッター



注意事項

必ず訓練を受けた専門家が装着してください。レースは摩耗します。少なくとも月に1回は点検してください。締めすぎると血行が悪くなる可能性があります。神経に問題のある患者には使用しないでください。レースを鋭利な角に近づけないでください。

他言語の注意事項はこちら:

clickmedical.co/advisories



保証:

www.clickmedical.co/terms/#warranty


米国のお客様

Click Medicalまで直接お問い合わせください
Help@ClickMedical.co ・ ヘルプライン: +1 970 670 7012


その他の国または地域のお客様:

お近くの販売店にお問い合わせください


- 1 装着ガイドラインに従ってガイドの位置を決めてください。QuickFit™ ツールの1/8インチパンチオプションを使用して穴を開けてください。

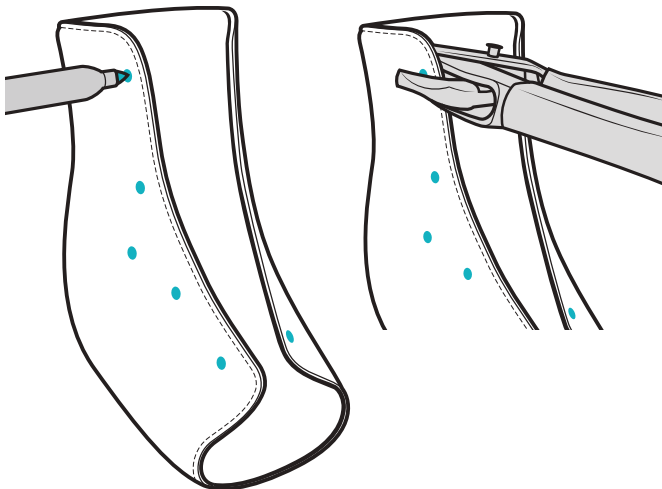


- 3 ガイドの位置が決まったら、セッティングツールでリベットを固定します。すべてのガイドでこの手順を繰り返します。

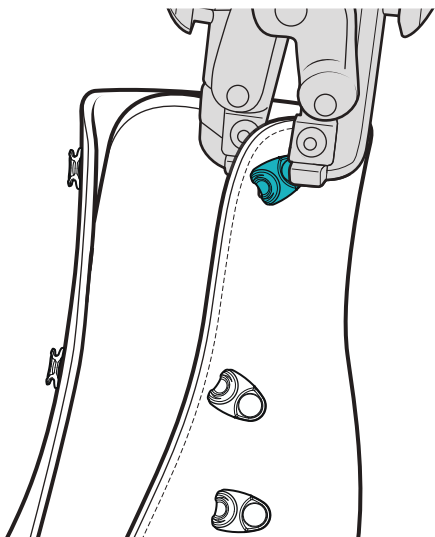


- 2 a) オスリベットをデバイス内部から挿入し、クイックレースガイドに通してクイックレースガイドを取り付けます。 b) メスリベットキャップをクイックレースガイドの上部にカチッとはめ込み、ガイドを靴に固定します。

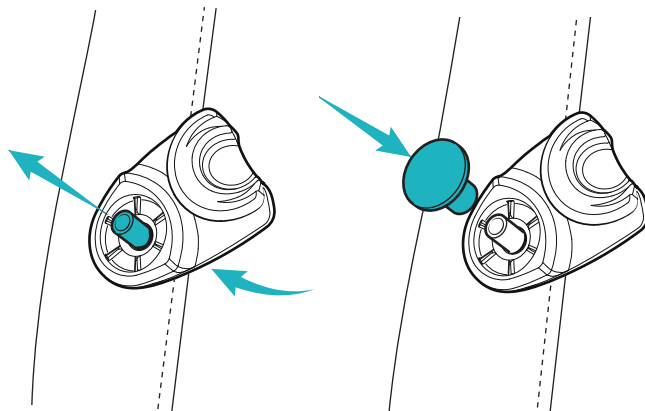


- 4 ダイアルの位置を決めます。タンの上部とハウジングの上部の間に1cmの隙間を設けます。4つの穴の位置をすべてマークします。

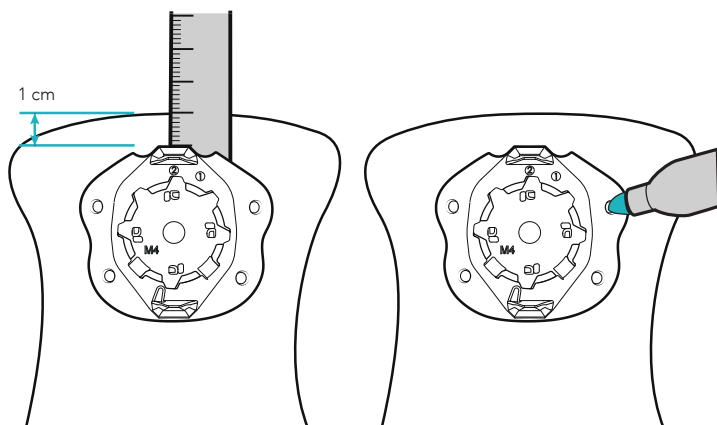


- 6 ダイアルハウジングをタンに取り付けます。手順2の説明に従ってリベットを留めます。配置に問題がなければ、QuickFit™ ツールを使用して固定します。

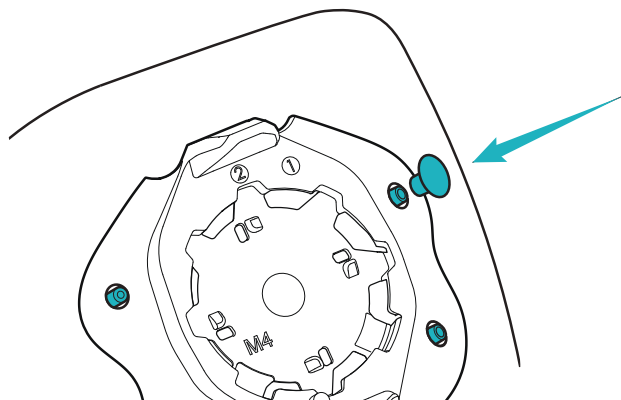


- 5 QuickFit™ ツールの1/8インチパンチオプションを使用して穴を開けます。

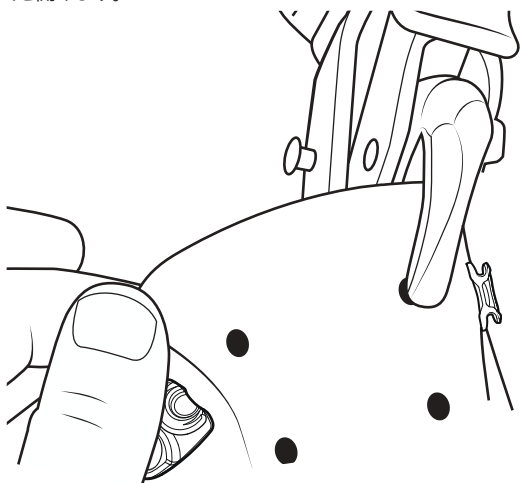

- 7 図のようにガイドを紐で結びます。

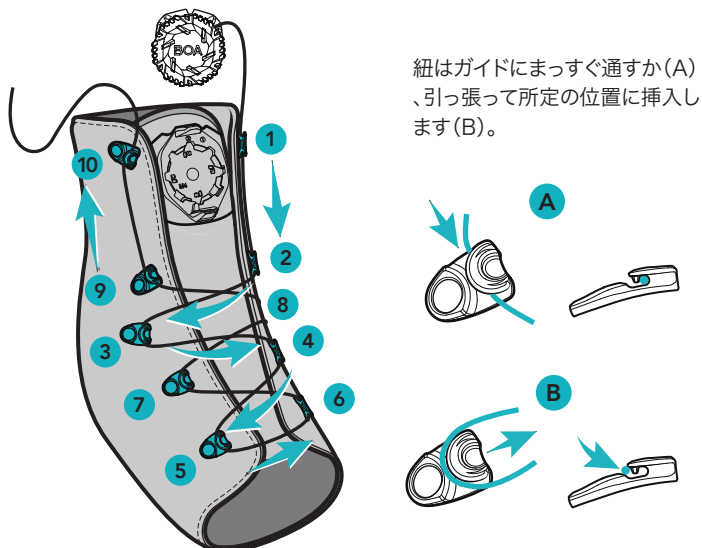


- 8 紐の交差部分のたるみを取り除き、最後のガイドからダイヤルの裏側まで約15cmの紐を測ります。印を付け、ワイヤーカッターで切り取ります。

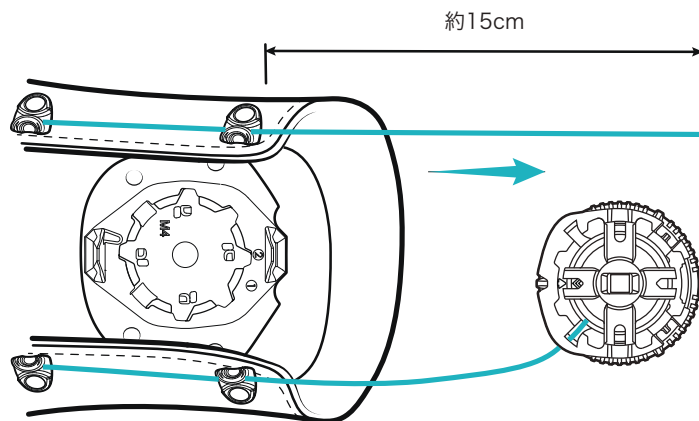


- 9 紐の先端を、プラスチックフランジの下ではなく、上部の開いた紐通し口に通します。紐をダイヤルに通して、下から出てくるまで押し込みます。


矢印が揃っていることを確認してください。揃っていない場合は、ダイヤルのベースを持ちながら、矢印が揃うまでダイヤルを回します。

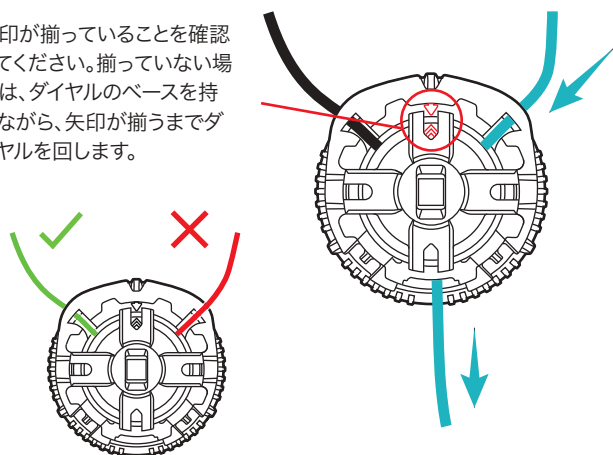

- 10 下図(A)のようにレースロックに通し、約5mmの余白を残します。結び目をしっかりと締め、5mmを残します。(B)をダイヤルの尾部から外します。(C)二重円形のレースロックをベースから外し、(D)を強く引っ張って結び目をダイヤル本体に引き込みます。

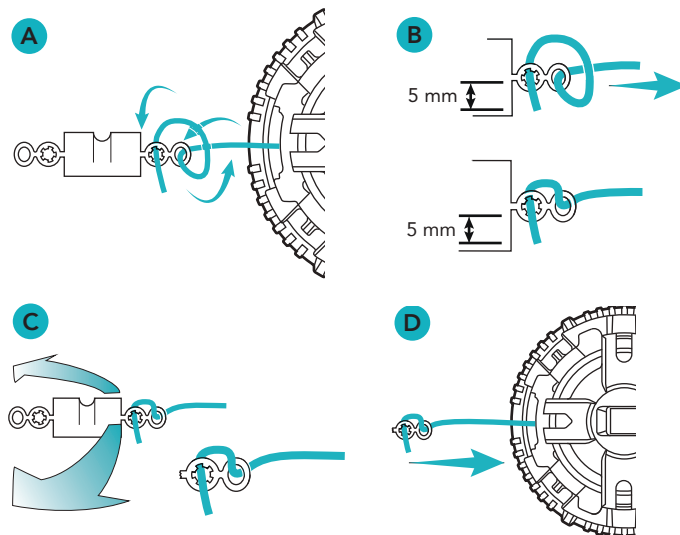

- 11 ダイアルベースのノッチをダイヤルハウジングの数字「1」に合わせ、ダイヤルをハウジングに押し込みます。ノッチがカラーの数字「2」を指すまで、ダイヤルを反時計回りに回します。

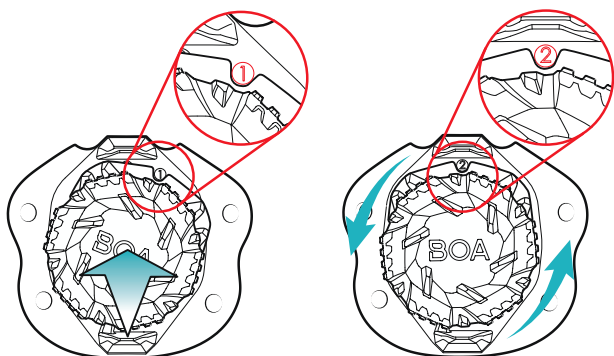

- 12 システムの動作をテストします。ダイヤルを時計回りに回すとレースが締まり、ダイヤルを引き出すと張力が解放されます。レースはガイドから簡単に外せるため、素早く着脱できます。

