


交換手順（対象）：

RP0200-230-05、QuickFit LG ダイヤル & レース 交換キット - ブラック

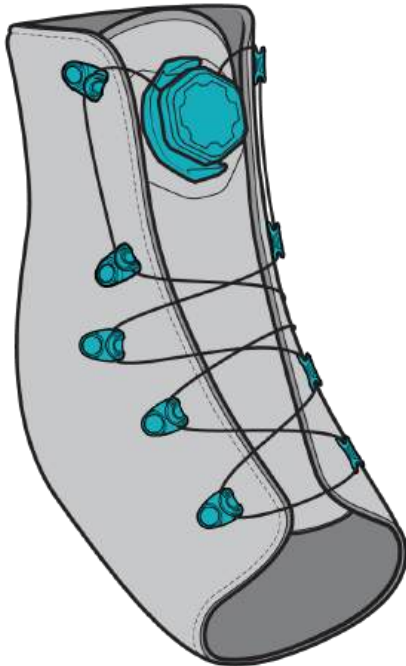

サポートと動画手順はこちら：clickmedical.co/quickfit-lacer

交換キット内容物：



交換用 1 個
スチールレース (2.0m)



交換用 1 個
BOA® リール

対応機種：QFL-230-B-2, QuickFit® Lacer, LG - ブラック 2 個セット



注意事項

取り付けは訓練を受けた専門家が行ってください。
レースは摩耗します。少なくとも月 1 回点検してください。締めすぎると血行が悪くなるおそれがあります。神経に問題のある患者には使用しないでください。レースを鋭利な端部に近づけないでください。

他言語の注意事項はこちら：clickmedical.co/advisories



保証：
www.clickmedical.co/terms/#warranty

米国のお客様：
Click Medicalへ直接お問い合わせ
ください Help@ClickMedical.co
ヘルプライン: +1 970 670 7012

海外のお客様：
お近くの販売代理店へお問い合わせください

UK REP

Parkway House, Palatine Rd,
Northenden, Wythenshawe, Manchester
M22 4DB United Kingdom

CH REP

MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt
61 5000 Aarau, Switzerland

MD


MDSS GmbH, Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

EC REP





Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101
Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012

- 1 ダイヤルを引き上げてテンションを解除します。下側のリールにある 2 つの取り外し口を確認してください。

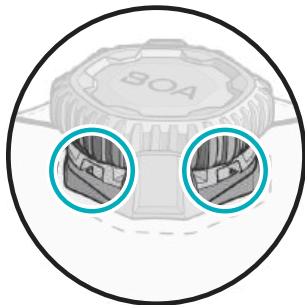


- 2 マイナスドライバーを 2 つのポートのいずれかに奥まで差し込みます。工具でリールを上方向にこじ上げ、カートリッジがパヨネットから外れて飛び出すまで持ち上げてください。


反対側のポートでも同様に行い、リールを完全に外します。

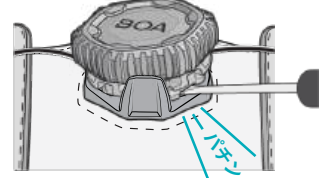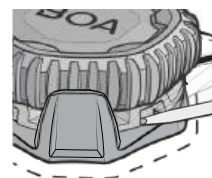


- 3 古いダイヤルとレースをシステムから取り外すため、レースを切ってください。

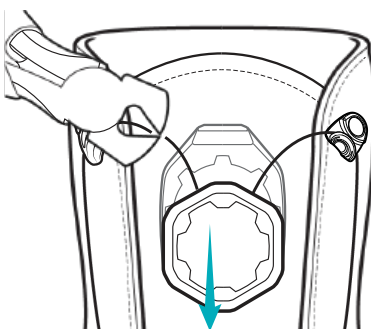


- 4 Lace the Guides as shown.

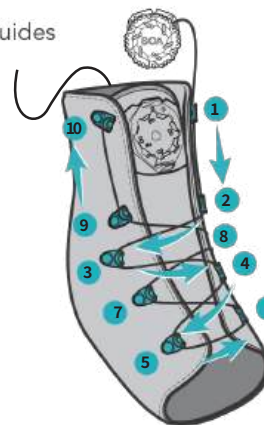


レースはガイド (A) にまっすぐ通すか、引き込んで所定位置に収めます (B)。

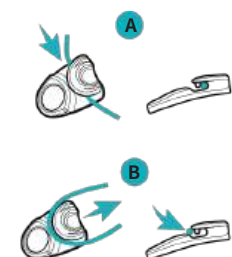


- レースが各ガイドを確実に通っていることを確認します。レースをしっかり引いて締め、上側ガイドからレース先端までを 10 ～ 25cm に測ります。各レースに 3cm 足してカットします。

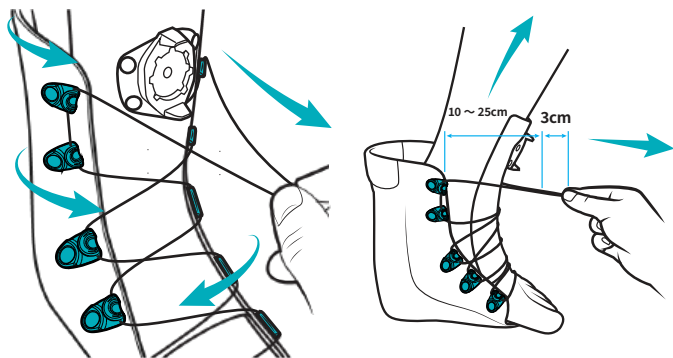


- 新しいリールを押し込み、閉じていることを確認します。ダイヤルを回して、2つの矢印が合う位置まで合わせます。

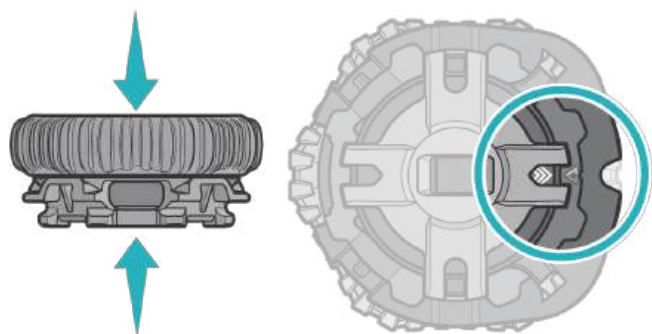


- レースが正しく通っていることを確認するため、レースを上部の出口ポートに通し、下部リールの窓から引き出します。反対側のレースも同様に行ってください。

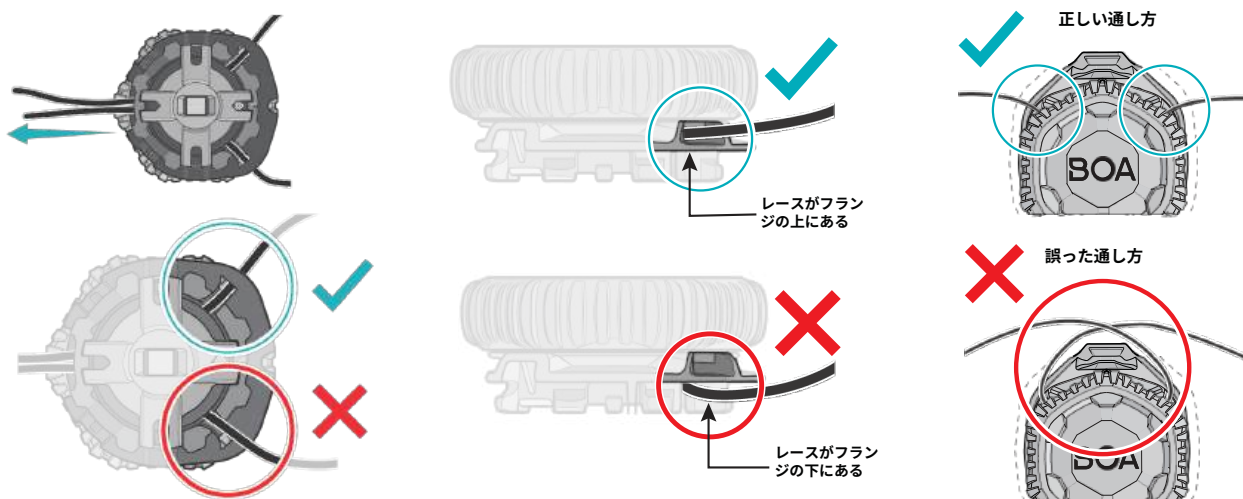

- レースロックをペンチでつかみます。レースを穴の裏側から押し込み、裏側に回して2つ目の穴へ通します。レースの余りは 2.5mm ～ 5.0mm にしてください。

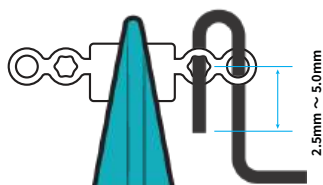


- レースをしっかり引いて固定します。レースロックを前後に曲げてコネクターを折り取ってください。レースをリールの中へ強く引き込みます。反対側も同様に行ってください。

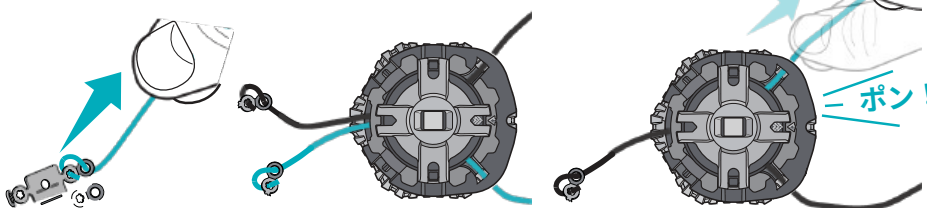

注：レースが正しく収まっていれば、レースロックと余り（端）は見えませんが、

- 10 取付プレートの「#1」に切り欠きを合わせ、リールをベースに押し込んで取り付けます。次にリールを反時計回りに回すと、「#2」が見えるようになります。

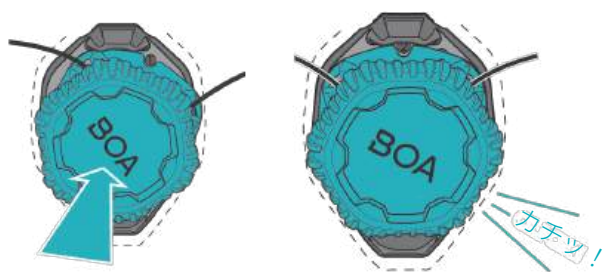

- 11 ダイヤルを外側に引いて、正しく取り付けられていることを確認したら、システムを動かしてスムーズに作動するかテストします：

押して固定。回して締める。引いて解除。

注：動きが重い／ざらつく場合は、リールを取り外し（手順1～2参照）、結び目と余りのひもが正しく収まっているか確認してください（手順9参照）。

