

交換手順の対象：

RP0200-130-05、QuickFit® ダイヤル & レース交換キット - ブラック
 RP0200-130-W、QuickFit® ダイヤル & レース交換キット - ホワイト



サポートと動画手順はこちら：clickmedical.co/quickfit-lacer

交換キット内容物：



交換用 1 個
 スチールレース、1.5m



交換用 BOA® リール 1 個

対応製品：

QFL-130-B-2、QuickFit® Lacer - ブラック 2 個入り
 QFL-130-W-2、QuickFit® Lacer - ホワイト 2 個入り



注意

必ず訓練を受けた専門家が取り付けてください。レースは消耗します。少なくとも月に 1 回は点検してください。締めすぎると血行が悪くなるおそれがあります。神経に問題のある患者には使用しないでください。レースを鋭利な縁に触れさせないでください。

他言語の注意事項はこちら：clickmedical.co/advisories



保証：
www.clickmedical.co/terms/#warranty
 米国のお客様：Click Medical へ直接ご連絡ください
 Help@ClickMedical.co ヘルプライン：+1 970 670 7012 海外のお客様：お近くの販売代理店へお問い合わせください

UK REP

Parkway House, Palatine Rd,
 Northenden, Wythenshawe, Manchester
 M22 4DB United Kingdom

CH REP

MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt
 61 5000 Aarau, Switzerland

MD


MDSS GmbH, Schiffgraben 41
 30175 Hannover, Germany

EC REP



Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101
 Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012


- 1 リールを引き出してテンションを解除します。

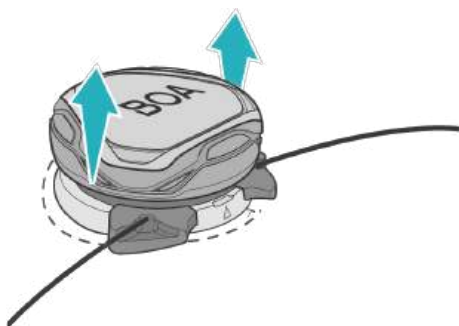

- 2 a. 矢印マークのあるタブに、マイナスドライバーを差し込みます。




- b. 工具でリールを上方向にこじり上げ、カートリッジがバヨネットから「ポンッ」と外れるまで持ち上げます。

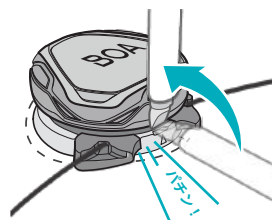


注：タブは、レースポートの間にある取付プレート上部にあります。


- 3 レースを切って、古いリールとレースをシステムから取り外します。

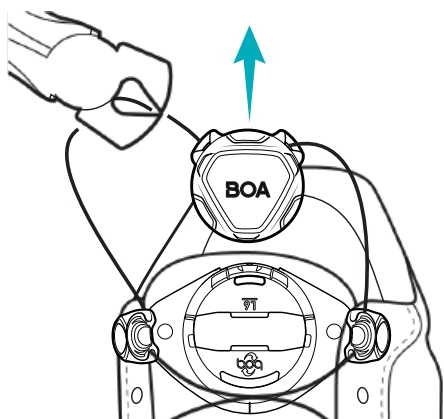


- 4 図のとおりガイドヘレースを通します。

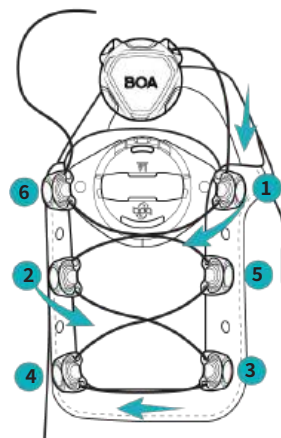

レースはガイド (A) にまっすぐ通すことも、(B) のように引き込んで所定位置に収めることもできます。素早く装着／取り外しできるように、レースはガイドからパチッと外せます。

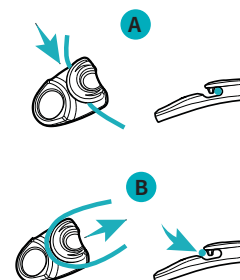

- 5 新しいリールを用意し、上から押して閉じます。

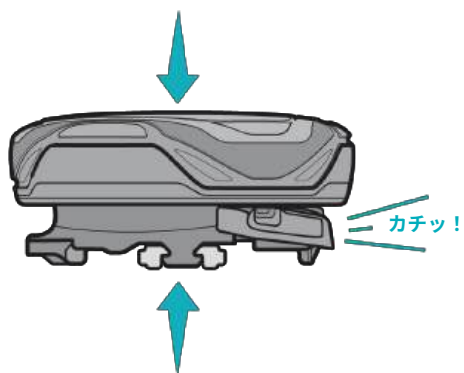


- 6 リール背面の2つの矢印が合うまで回します。




- 7 レースをリールに取り付けます：


- a) 右のレースを右のレースポートに通します。

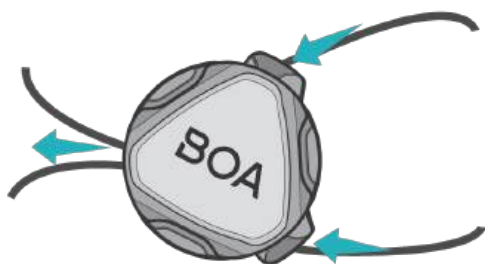


- b) 必要なレースの長さを決めます。レースポート1か所あたりの余裕は最大 15cm までにしてください。

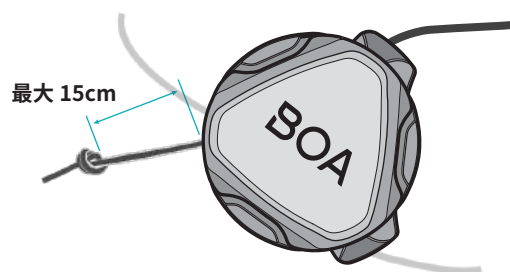


- c) ひと結び（オーバーハンドノット）で固定します。結び目から先を 4～7mm 残して余りをカットしてください。

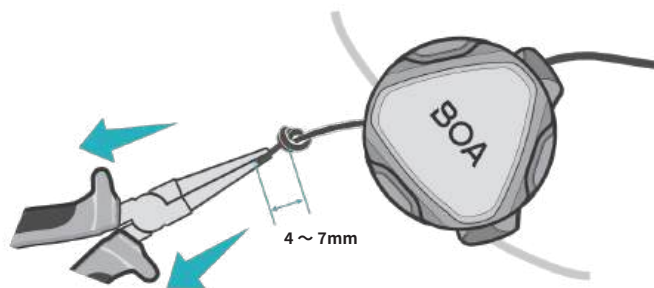


- d) 結び目をポート内に引き込みます。リールの反対側も同様に行ってください。

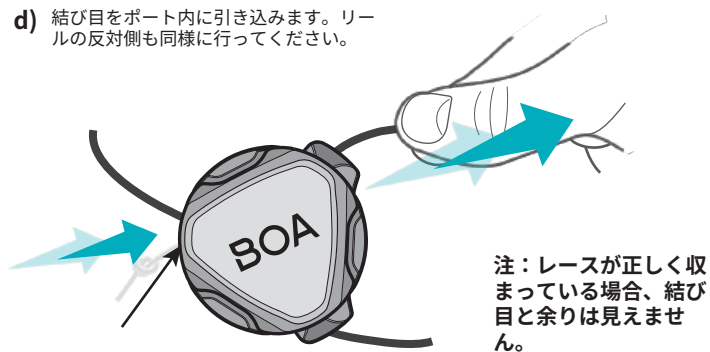

- 8 リールをマウンティングプレートに最後までしっかりはめ込んでください。

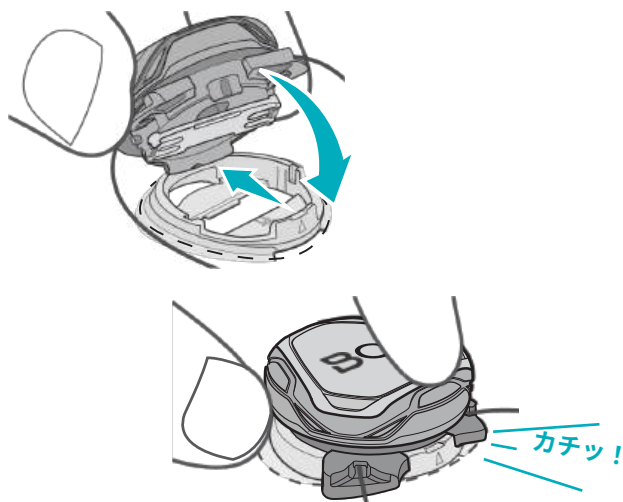

- 9 スムーズに動くか確認するため、システムを一度作動させてください：

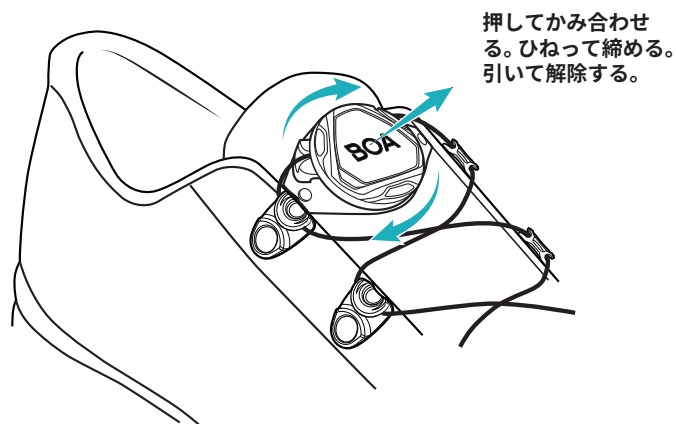

注：動きが引かかる場合は、リールを外し（手順 1～2 参照）、結び目と余りが正しく収まっているか確認してください（手順 7 参照）。