

GARANTIE

Le Click Reel est garanti pour la durée de vie de l'appareil dans lequel il est installé à l'origine. L'enregistrement du Click Reel est requis au moment de la livraison du dispositif original.

Pour s'enregistrer : <https://clickmedical.co/contact-us/cr-registration/>

GARANTIE

Pour obtenir des informations sur la garantie de tous les produits de Click Medical: <https://clickmedical.co/terms/#warranty>.

Clients Américains:

Contact Help@ClickMedical.co

Tel: +1-970-670-7012

Clients Internationaux:

Veillez contacter votre distributeur local. Voir les instructions dans d'autres langues : clickmedical.co/instructions


Pour les suggestions et les directives concernant les matériaux, veuillez vous référer à la page **Fiche de données du matériel**:

clickmedical.co/mds

Les produits de Click Medical sont protégés par des brevets.


Pour la liste complète, voir www.clickmedical.co/patents

Contenu du kit Click Reel Grip:

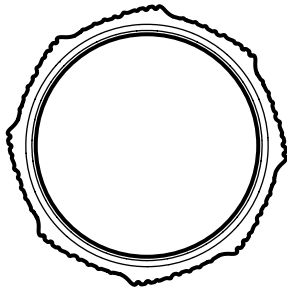

Comfort Grip x5
AC-100-05

- OR -

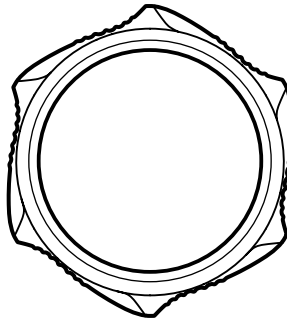

Power Grip x5
AC-101-05

Autres Matériaux Nécessaires (non fournis):



Brosse




Colle Instantanée




Nettoyant de surface Alcool isopropylique ou similaire

Préparation de la Surface:

- 1 Nettoyez toute la surface du cadran avec de l'alcool isopropylique (surligné en gris).

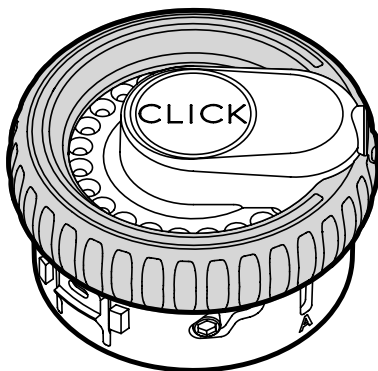


- 2 Nettoyez toute la surface intérieure de la poignée avec de l'alcool isopropylique (surligné en gris).

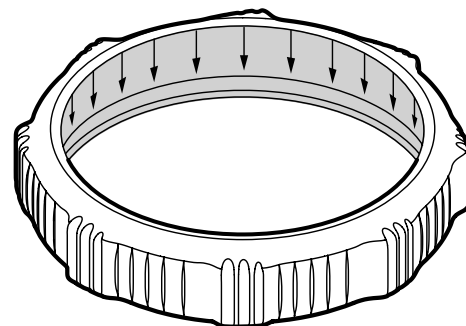

Application adhésive:


3 Application de l'adhésif:

1. à l' aide du pinceau, appliquez l'adhésif sur la surface intérieure de la poignée.
2. Appliquez l'adhésif sur la poignée du cadran à l'aide du pinceau.

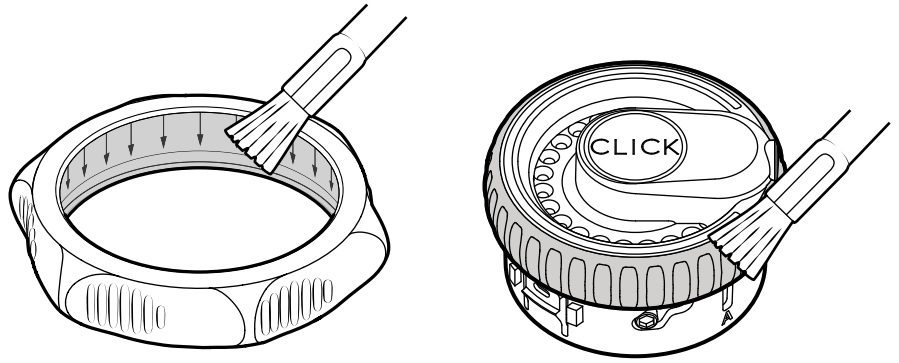


Fixation de la poignée:


- 4 Identifiez le fond de la poignée. Des flèches sur la surface intérieure de la poignée indiquent le fond.

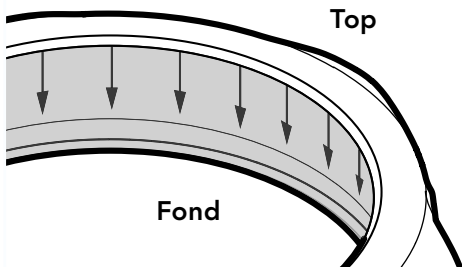


- 5 Veillez à ce que la poignée soit correctement orientée de manière à ce que les coussinets des doigts soient alignés avec le sens du serrage.

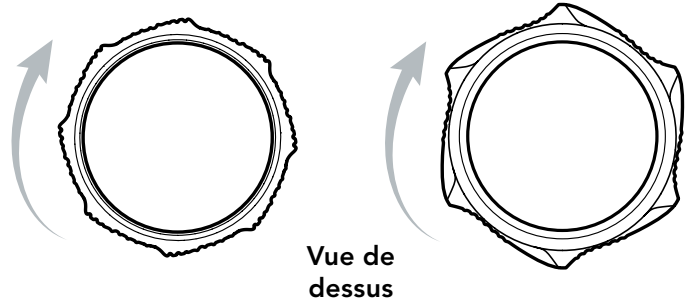

- 6 Faites glisser la poignée sur le cadran alors que l'adhésif est encore humide.

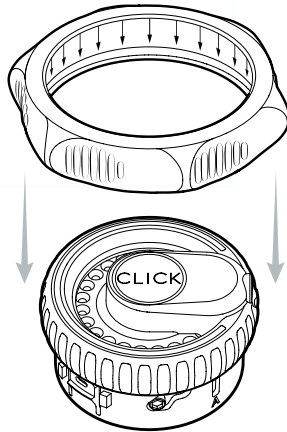

Conseil de pro : Pour une meilleure apparence, alignez un jeu de lobes sur la poignée avec la ligne centrale du monospoke.

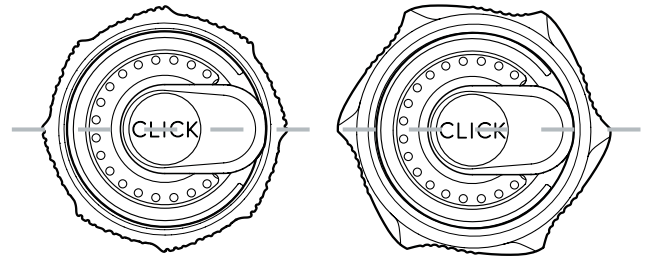

Finition:

- 7 Laissez un temps suffisant pour que la colle sèche.



- 8 Après le séchage de la colle, vérifiez que la poignée est bien fixée au cadran.


- 9 Nettoyez l'excès d'adhésif sur le cadran.

UK REP MDSS-UK RP LIMITED, 6 Wilmslow Road
Rusholme, M14 5TP Manchester
United Kingdom

CH REP MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Suisse

MD MDSS GmbH, Schiffgraben 41
30175 Hannover, Allemagne

EC REP 

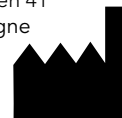

Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101
Steamboat Springs, CO 80487, USA +1-970-670-7012