



RevoLock®

CLICK
MEDICAL

Kit de dial V2 & V3 BOA® y cordón HC

Para usar con la salida de cordón del puerto C

Revisado en mayo de 2025

RP-310



GARANTÍA

www.clickmedical.co/terms/#warranty

Cientes de EE.UU.:

Contacto Help@ClickMedical.co

Tel: +1-970-670-7012

Cientes internacionales:

Póngase en contacto con su distribuidor local.

Los productos de Click Medical


están protegidos por patente.

Para consultar la lista completa,

visite

www.clickmedical.co/patents


Revisado en 2023

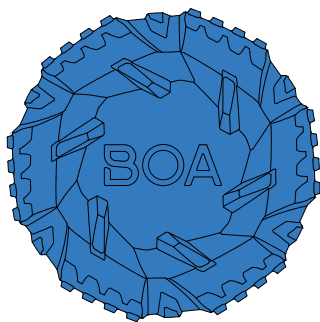

RevoLock® El kit de dial V2 & V3 BOA y cordón HC contiene:



Dial BOA® de cuerda V2

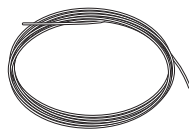

Cordón



Alimentador de cordón

Si el dispositivo utiliza el "puerto de encaje A" para dirigir el cordón al extremo distal del encaje, necesitará un carrete de "puerto A".

Póngase en contacto con su distribuidor para recibir esta pieza, RP-310A.



UK REP

MDSS-UK RP LIMITED, 6 Wilmslow Road
Rusholme, M14 5TP Manchester
Reino Unido

CH REP

MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Suiza

MD

MDSS GmbH, Schiffgraben 41,
30175 Hannover, Alemania

EC REP




Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101
Steamboat Springs, CO 80487, Estados Unidos +1-970-670-7012

Para ver un video informativo sobre la ajustabilidad de Click y el funcionamiento de RevoLock, visite

Visit www.clickacademy.co


1 Retire el dial.

Localice el inserto metálico.
Inserte un pequeño destornillador de pala entre el inserto metálico y el cuerpo del dial.
Haga palanca suavemente para levantar el carrete.

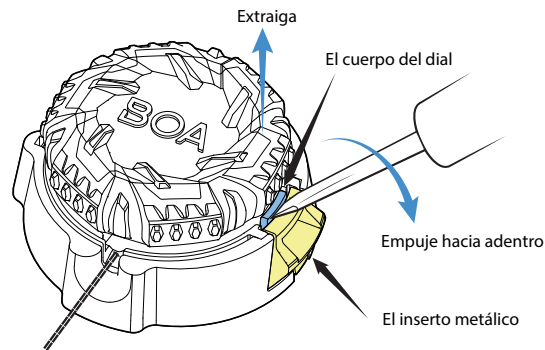


2 Retire el cordón


a) Asegúrese de que el dial está abierto tirando de él hacia arriba.

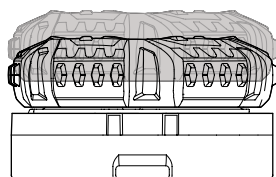

b) Extraiga todo el cordón restante del dial.

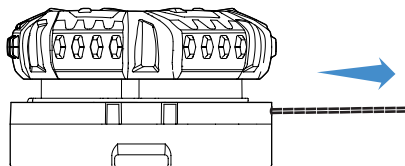


c) Localice la abertura grande de salida del cordón en la base del dial. Enganche el lazo del cordón en el dial con un palillo dental y tire del cordón para sacarlo del dial.

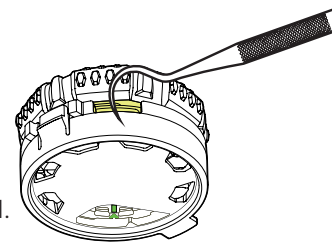

d) Corte el cordón y sáquelo del dial. A continuación, retire el cordón del dispositivo.


Confirme que está utilizando el carrete de repuesto correcto identificando la C en la parte inferior del dial.

Si el carrete tiene una "A" en la parte inferior o utiliza el "puerto de cordón A" para dirigir el cordón al extremo distal del encaje, necesitará un carrete de "puerto A".

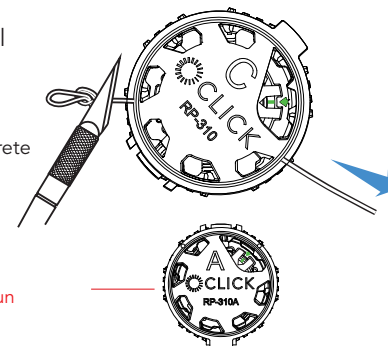


3 Coloque el cordón en el sistema

Utilizando el alimentador de cordón, dirija el cordón desde el soporte del dial a hacia el tubo, a través de la carcasa distal hacia el encaje

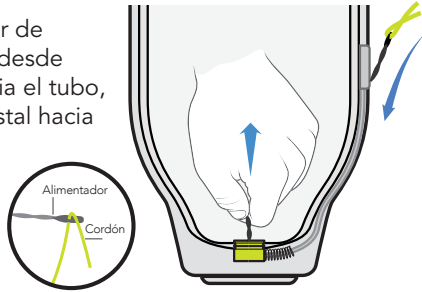


4 Coloque el cordón en el dial Prepare el dial para la colocación del cordón.


1 Asegúrese de que el dial está encajado empujándolo hacia abajo.

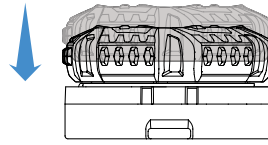


2 Gire el dial y asegúrese de que la marca verde está alineada con la flecha verde. En caso contrario, sujete la base y gire el dial hasta que las marcas se alineen.

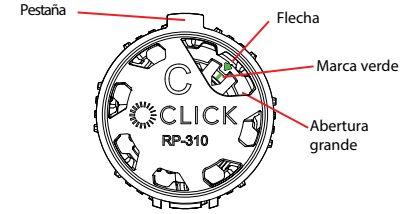

b) Localice los puertos de entrada de cordones.

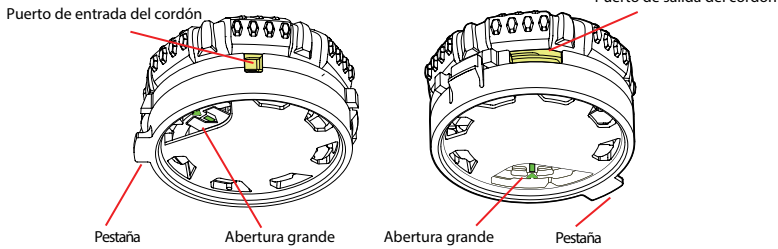


c) Introduzca el cordón por el puerto de entrada y sáquelo a través del puerto de salida del cordón ubicado en el lado opuesto del dial

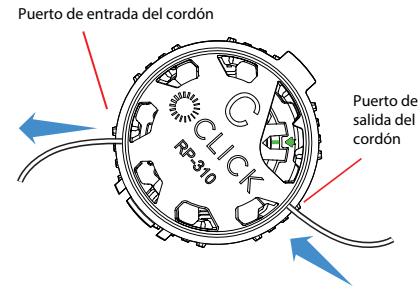

d) Ate el cordón con un nudo simple


1 Haga un lazo.

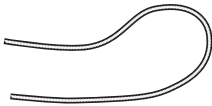

2 Haga un nudo simple con el lazo.




3 Apriete el nudo. El lazo del nudo debe medir aproximadamente 1 cm.

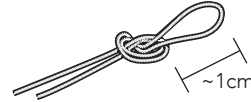

4 Corte la cola




e) Tire del lazo hacia el dial para asentar el nudo.

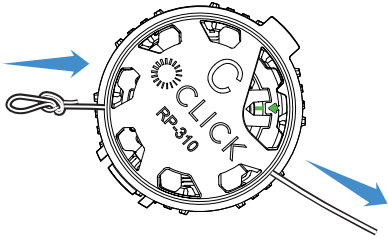

5 Instale el dial

a) Inserte el pie del dial en el soporte

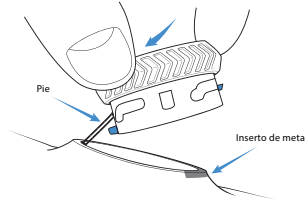


b) Presione el carrete firmemente en el soporte (debe oír un "clic" cuando esté seguro).




6 Determine la longitud del cordón

Determine la cantidad de cordón necesaria para extenderse fuera del encaje y fijarse al protector y al inserto roscado.

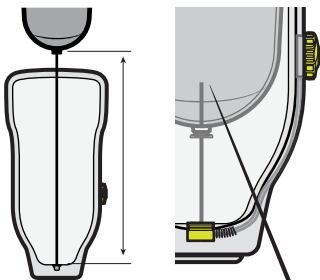

Utilizando un alimentador de cordón, inserte el cordón y haga un nudo doble.

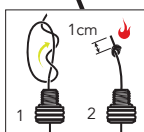


Note: La longitud máxima del cordón no puede superar los 55 cm.

7 Prueba de funcionamiento

- Conecte el inserto roscado al protector.
- Enrolle el cordón.
- Tire del dial para soltarlo.
- Retire el protector y el cordón del encaje.
- Vuelva a enrollar el cordón.

Notes:

- Realice inspecciones rutinarias del cordón para detectar signos de deshilachado o desgaste.
- Sustituya el cordón cada 6 meses.
- Mantenga el cordón alejado de las llamas abiertas.

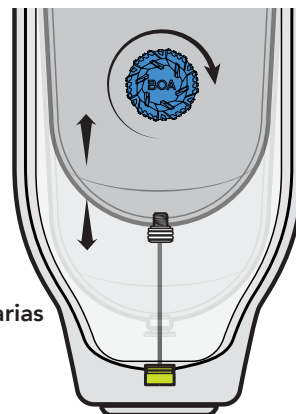

✓ ¡Felicidades!
¡Ha terminado!

