

**RevoLock®** El kit V2 & V3 de cordón HC de contiene:



Cordón



Alimentador de cordón

Si el dispositivo utiliza el "puerto de cordón A" para dirigir el cordón hasta el extremo distal del encaje, utilizará las instrucciones del puerto A.



**GARANTÍA:**

[www.clickmedical.co/terms/#warranty](http://www.clickmedical.co/terms/#warranty)

**Clientes de EE.UU:**

Contacto directo con Click Medical a través de [Help@ClickMedical.co](mailto:Help@ClickMedical.co)

Línea de ayuda: +1-970-670-7012

**Clientes internacionales:**

Póngase en contacto con su distribuidor local.

Los productos de Click Medical están protegidos por patente.

Para consultar la lista completa, visite

[www.clickmedical.co/patents](http://www.clickmedical.co/patents)

Revisado en 2023



**Recomendaciones**

Debe ser instalado por un profesional capacitado en la fabricación de RevoLock. El cordón se desgastará. Como mínimo, inspecciónelo mensualmente y sustitúyalo cada 6 meses.

Se puede producir pérdida de suspensión si falla el cordón.

No utilizar en pacientes con problemas de nervios.

Mantenga el cordón alejado de llamas abiertas y bordes afilados.

Asegure el inserto al protector antes de tensar el sistema.

Para ver las recomendaciones en otros idiomas, visite:

[clickmedical.co/advisories](http://clickmedical.co/advisories)

**UK REP** MDSS-UK RP LIMITED, 6 Wilmslow Road  
Rusholme, M14 5TP Manchester  
Reino Unido

**CH REP** MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Suiza

**MD** MDSS GmbH, Schiffgraben 41,  
30175 Hannover, Alemania




Click Medical, LLC, 1205 Hilltop Parkway, W101  
Steamboat Springs, CO 80487, Estados Unidos +1-970-670-7012

Para ver un video informativo sobre la ajustabilidad de Click y el funcionamiento de RevoLock, visite [www.clickacademy.co](http://www.clickacademy.co)


**1 Retire el dial.**

Localice el inserto metálico. Inserte un pequeño destornillador de pala entre el inserto metálico y el cuerpo del dial. Haga palanca suavemente para levantar el carrete.

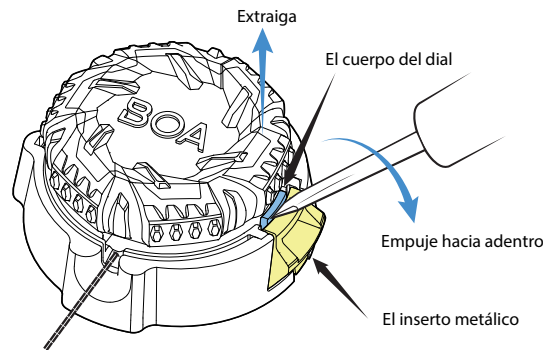


**2 Retire el cordón**


b) Asegúrese de que el dial está abierto tirando de él hacia arriba.

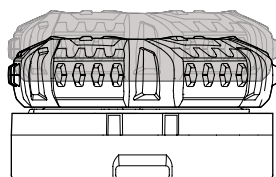

b) Extraiga todo el cordón restante del dial.

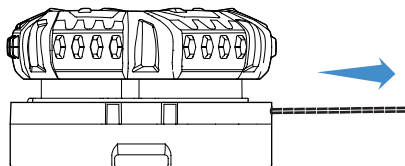


c) Localice la abertura grande de salida del cordón en la base del dial. Enganche el lazo del cordón en la esfera con un palillo dental y tire del cordón para sacarlo del dial.

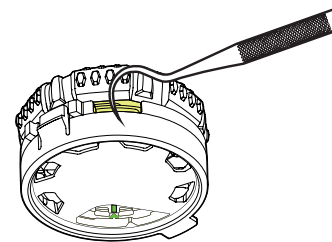

d) Corte el cordón y sáquelo del dial. A continuación, retire el cordón del dispositivo.

Confirme que está utilizando el carrete de repuesto correcto identificando la C en la parte inferior del dial.

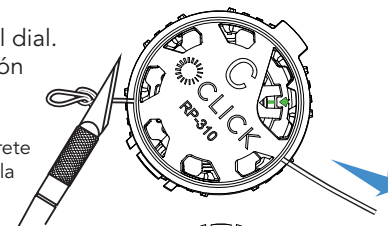


Si el carrete tiene una "A" en la parte inferior, utiliza el "puerto de encaje A" para dirigir el cordón al extremo distal del encaje, necesitará un carrete de "Puerto A".

Utilice las instrucciones de Puerto A incluidas con este kit.




### 3 Coloque el cordón en el sistema

Utilizando el alimentador de cordón, dirija el cordón desde el soporte del dial a hacia el tubo, a través de la carcasa distal hacia el encaje.

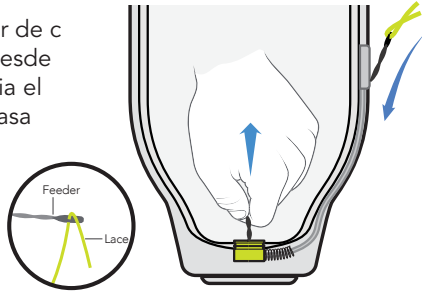


### 4 Coloque el cordón en el dial Prepare el dial para la colocación del cordón.


1 Asegúrese de que el dial está encajado empujándolo hacia abajo.

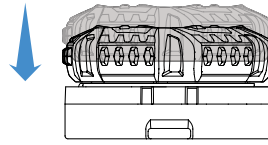


2 Gire el dial y asegúrese de que la marca verde está alineada con la flecha verde. En caso contrario, sujete la base y gire el dial hasta que las marcas se alineen.

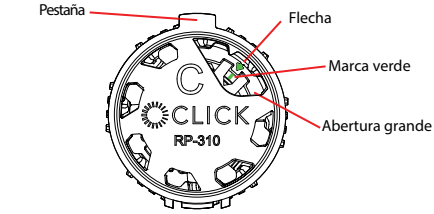

b) Localice los puertos de entrada de cordones.

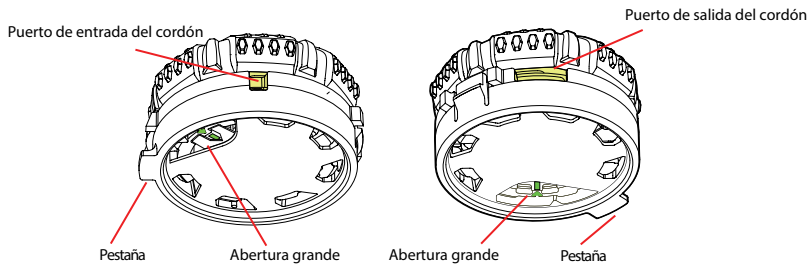


c) Introduzca el cordón por el puerto de entrada y sáquelo a través del puerto de salida del cordón ubicado en el lado opuesto del dial

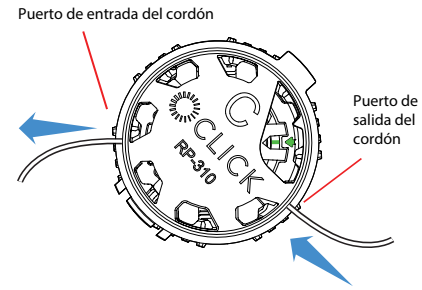

d) Ate el cordón con un nudo simple


1 Haga un lazo.

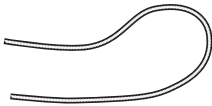

2 Haga un nudo simple con el lazo.




3 Apriete el nudo. El lazo del nudo debe medir aproximadamente 1 cm.

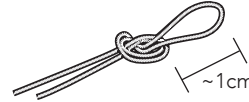

4 Corte la cola




e) Tire del lazo hacia el dial para asentar el nudo.

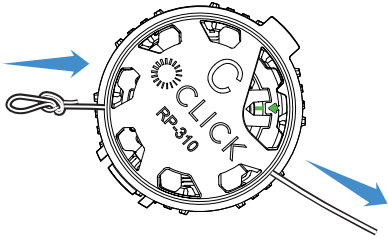

### 5 Instale el dial

a) Inserte el pie del dial en el soporte

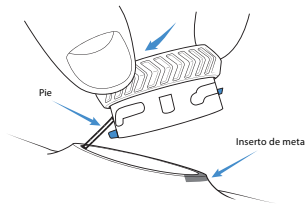


b) Presione el carrete firmemente en el soporte (debe oír un "clic" cuando esté seguro).




### 6 Determine la longitud del cordón

Determine la cantidad de cordón necesaria para extenderse fuera del encaje y fijarse al protector y al inserto roscado.

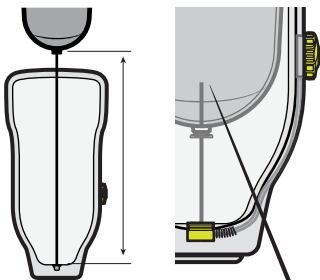

Utilizando un alimentador de cordón, inserte el cordón y haga un nudo doble.

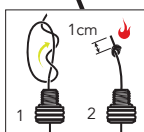


**Note:** La longitud máxima del cordón no puede exceder los 55 cm.

### 7 Prueba de funcionamiento

- Conecte el inserto roscado al protector.
- Enrolle el cordón.
- Tire del dial para soltarlo.
- Retire el protector y el cordón del encaje.
- Vuelva a enrollar el cordón.

**Notes:**

- Realice inspecciones rutinarias del cordón para detectar signos de deshilachado o desgaste.
- Sustituya el cordón cada 6 meses.
- Mantenga el cordón alejado de las llamas abiertas.

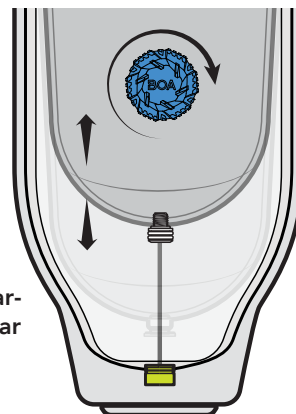

✓ ¡Felicidades!  
¡Ha terminado!

